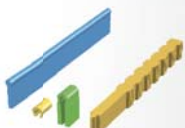
**PRECI-HORIX СТАНДАРТ**

1701

КОМПЛЕКТ

2 структуры со стержнями из пластика
 6 желтых опорных ползунов
 6 обрабатывающих опорных ползунов
 1 вставляемый инструмент

**PRECI-HORIX PLASTICWAX**

1731

КОМПЛЕКТ

2 стержневые структуры PLASTICWAX
 6 желтых опорных ползунов
 6 обрабатывающих опорных ползунов
 1 вставляемый инструмент

**PRECI-HORIX COMBI**

1741

КОМПЛЕКТ

1 стержневая структура из пластика
 2 желтых опорных ползуна
 2 обрабатывающих опорных ползуна
 2 кожуха из нержавеющей стали
 1 вставляемый инструмент

Опорный ползун PRECI-HORIX

нормальное удерживание:

1802 **желтый** 6 штук# 1802B **желтый** 50 штук

уменьшенное удерживание:

1805 **белый** 6 штук# 1805B **белый** 50 штук

увеличенное удерживание:

1806 **красный** 6 штук# 1806B **красный** 50 штук

Комбинированный пакет:

1807 2 + 2 + 2 штук

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ PRECI-HORIX**

Сверхтонкий кожух из нержавеющей стали со слоем нитрата/титана (окрашенный золотом) прекрасно подходит к опорным ползунам в протезе

1706 6 штук

1706B 50 штук

**ПЛАСТИКОВАЯ СТРУКТУРА PRECI-HORIX**

ВВыгорающая пластиковая структура.

Отливается из какого-либо тяжелого сплава.

Длина: 50 mm – Высота: 4 mm – ø 1,8 mm

1704 6 штук

1704B 50 штук

**PRECI-HORIX PLASTICWAX PATTERN**

Идеальная для использования с быстро схватывающимся вкладываемым материалом.

Отливается из какого-либо тяжелого сплава.

Длина: 50 mm – Высота: 8,25 mm – ø 1,8 mm

1734 6 штук

1734B 50 штук

WWW.CEKA-PRECILINE.COM**SWISS MADE**

CEKA REVAX

CEKA SOL

PRECI-HORIX

PRECI-VERTIX

PRECI-VERTIX AT

PRECI-BAR

PRECI-BALL

PRECI-CLIP

PRECI-CLIX EXTRACORONAL

PRECI-CLIX AXIAL

PRECI-CLIX RADICULAR

PRECI-TUBIX/MORTIX

PRECI-POST

PERMA-RET

3C-BOND

EXPANDO

PRECI-HORIX®**PRECI-HORIX®**

Проспект Nr. 273.R-ed.A

Copyright© ALPHADENT NV 4/2008

BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

Division of **ARSEUS**

ALPHADENT NV

Textielstraat 24

8790 Waregem, Belgium

tel +32 56 629 100

fax +32 56 629 101

e-mail: info@ceka-preciline.com

info@dentald.ru

www.dentald.ru

PRECİ-HORİX

ПРОСТОЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Система стержня (соединительной дуги) и опорного ползуна PRECI-HORIX, разработанная Хельмутом Хадером, является наиболее популярной из всех стержневых систем вследствие своей экономичности и простоты. Прекрасная фиксация пластиковых зажимов, комфортность ощущения пациента, легкость обработки и долговечность делают систему PRECI-HORIX первым вариантом выбора среди специалистов в течение более 30 лет.




- Имеется возможность выбора из трех уровней фиксации (удерживания) легко заменяемых опорных ползунков охватывающих детали
- Стержневая структура может отливаться из сплава по выбору.
- Система в высшей степени пригодна для использования на имплантатах
- Непосредственная опора и вращательное движение
- Мягкая защелка опорных ползунков охватывающих детали обеспечивает пациенту защиту и безопасность.



КОЖУХ PRECI-HORIX

УПРОЩАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЖИМОВ И СКОБ

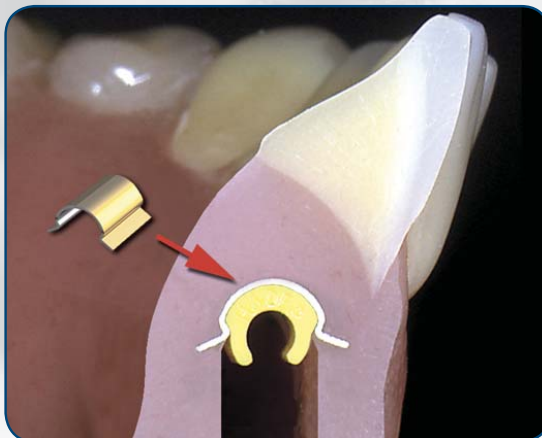

Рекомендуемым использованием является обработка металлических кожухов, вставляемых в зубной протез, упрощающая помещение зажимающей скобы, и последующее использование одного из трех удерживающих зажимов пластиковых зажимающих скоб PRECI-HORIX в металлических кожухах.

- Белый: уменьшенное удерживание
- Желтый: нормальное удерживание
- Красный: увеличенное удерживание

Превалирующая структура 1,8 мм совместима с опорными ползунами PRECI-CLIP (смотрите отдельную листовку).



ЛЕГКАЯ ОБРАБОТКА

