




ПЛАСТИНЫ
для вакуумных формовщиков

Компания Bio-Art была основана в 1977 году Джермано Хосе Пиччин как предприятие по производству артикуляторов. Начиная с самых первых заказов философия бизнеса заключалась в следующем: «Внедрять инновации, прислушиваясь к общественному мнению, и разрабатывать продукты, отвечающие потребностям рынка». Следуя этой идее, компания Bio-Art росла и развивалась, зная, что быть лидером рынка означает всегда находиться в авангарде передовых тенденций, разрабатывая интеллектуальные решения для здравоохранения и социального благополучия. Это понимание позволило компании Bio-Art непрерывно инвестировать в инновационные технологии для улучшения качества продукции и совершенствования процессов производства, сохраняя при этом фундаментальные ценности, профессионализм и устойчивое развитие.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ для вакуумно-формовочных машин

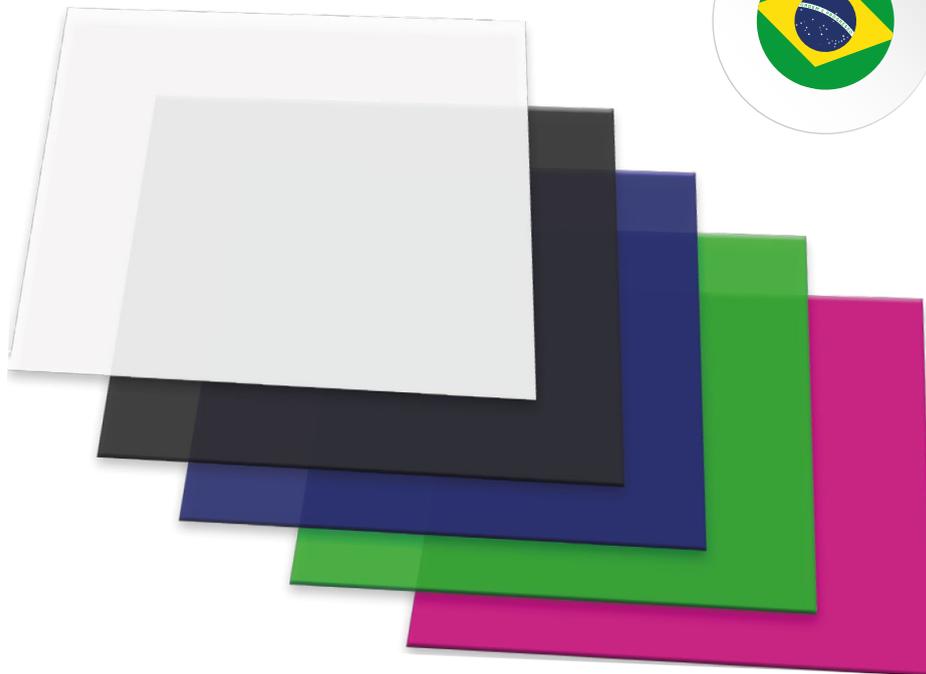



Crystal Plate

- 0,3 мм (уп. 10 шт)
- 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 мм. (уп. 5 шт)
- Прозрачные, жесткие
- Лотки для фторирования, брекетов, при бруксизме, ретейнеры, индивидуальные лотки, для регистрации прикуса, хирургические шаблоны
- 126 x 126 мм.



Soft Plate

- 1,0; 1,5; 2,0 мм.; (уп.10 шт.)
- 3,0; 4,0 мм. (уп.5 шт)
- Прозрачные, мягкие
- Лотки для отбеливания, фторирования, миорелакс, для защитных, ночных кап, дубликатов моделей
- 131 x 131 мм.




Soft Color

- 3,0 мм. (уп.5 шт)
- Цвет (на выбор): Black, Blue, Green, Pink, White
- Защитные, спортивные капы
- 131 x 131 мм.



- 3,0 мм. (уп. 2 шт.)
- Цвета: Blue&White, Black&Yellow, Pink&White, Green&Yellow, Green&White
- 131 x 131 мм.

Soft Bicolor

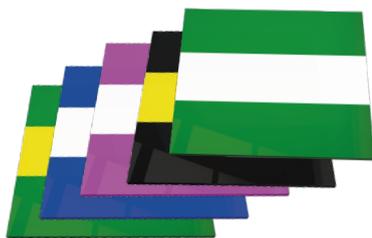

- 3,0 мм. (уп. 5 шт.)
- Цвета: Blue&White, Black&Yellow, Pink&White, Green&Yellow, Green&White
- Защитные, спортивные капы
- 131 x 131 мм.

Soft Bicolor Mix



- 3,0 мм. (уп.5 шт)
- Цвета: Black, Blue, Green, Pink, White
- Защитные, спортивные капы
- 131 x 131 мм.

Soft Mix Color

ФОРМОВКА КАПЫ



После обжима модели выключите формер и подождите 30–60 сек.



Поместите пластину в рамке и нагревайте до провисания ее примерно на 1 см. Сбрызните модель силиконом и поместите на платформу вакуумформера.



Остудите пластину с моделью в течение 20 мин. Чтобы сократить время ожидания положите в ледяную воду или используйте спрей для охлаждения.



Обожмите пластину по модели. Если использовать ламинаты позиция фиксирующего устройства формера примерно 3 мм. от резового края небной стороны.



Снимите капю с модели и обработайте ножницами. Доработайте края с помощью бормашины и боров для первичной и финишной обработки.

