

# CADLOCK®

Точно спроектированный  
и оптимизированное  
приложение для цифровых  
рабочих процессов!

*Präzision seit 1968*



# CADLOCK



Точно разработанная и оптимизированная насадка для приложений CAD! CADLOCK — это жесткий экстракоронковый фиксирующий элемент с точной регулировкой для протезных реставраций со свободными концами и седловидными частичными протезами.

Современное и прочное решение для съемных протезов с мягкими скользящими креплениями.



Современное и прочное решение для ваших съемных зубных протезов с мягкой



## ПОКАЗАНИЯ

Частичные протезы со свободным концом и ограниченным седлом; идеально подходит для балок



## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

- Легкая регулировка трения (в кресле)
- Не требуется дополнительных калибровочных инструментов и приборов
- Довольные пациенты благодаря конструкции, не имеющей запаха и не требующей обслуживания
- Легкое и мягкое введение для пациентов.
- Высочайшая точность для долговечных реставраций

Трение Бесступенчатая и простая регулировка с помощью винта – оптимальная фиксация даже спустя годы, замена не требуется.



Пластиковую вставку можно заменить в любое время – долговечность и простота обслуживания.




Непревзойденно малые размеры зазора – минимальное скопление слюны (низкое количество бактерий и отсутствие запаха)




Система CADLOCK состоит из матрицы (Ti), фрикционной вставки (пластик), винта активации (Ti) и охватываемой части (поставляется в виде файлов STL).



Матрица из высококачественного чистого титана – прочное, долговечное, легкое и надежное соединение.

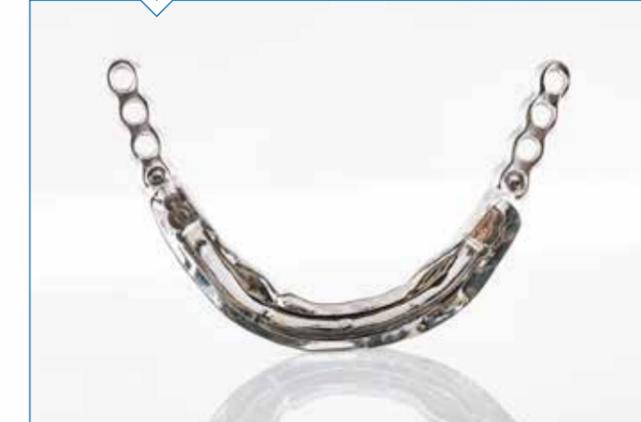

Идеальная посадка – практически не требуется последующих действий и экономия времени

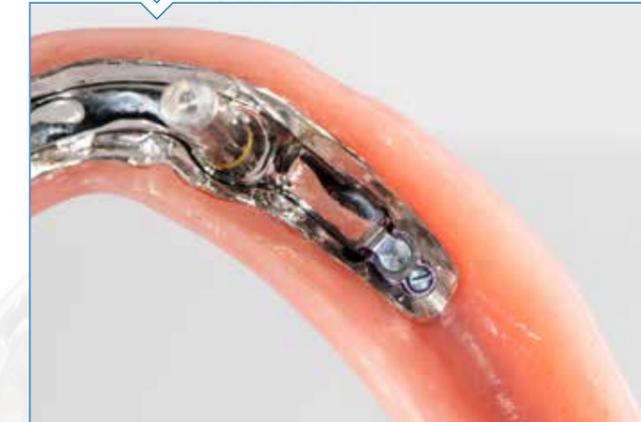

CADLOCK, с нашей точки зрения, является первым приспособлением, которое идеально подходит для цифрового рабочего процесса. Впервые мы можем идеально и очень точно фрезеровать навесное оборудование в надстройке. Ручные усилия были значительно сокращены – фактически до минимума. Мы можем поделиться этими преимуществами с точки зрения скорости и чистоты с нашими клиентами-фрезеровщиками. MDT Кристиан Ханнкер и MDT Свен Большо - Фрезерный центр Ханнкера, Германия



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



4331 Матрица, фрикционная вставка, активационный винт



737 Фрикционная вставка



738 Матрица



726 Винт активации

## Инструменты



750 Параллельная оправка



572 Отвертка



Detailed information and step by step instructions can be found on ZL Microdent website.

[www.zl-microdent.de](http://www.zl-microdent.de)

**ZL MICRODENT**  
Attachment GmbH & Co. KG  
Harkortstraße 2  
58339 Breckerfeld

Tel. +49 2338 801-0  
Fax. +49 2338 801-40  
[info@zl-microdent.de](mailto:info@zl-microdent.de)  
[www.zl-microdent.de](http://www.zl-microdent.de)

[www.dentald.ru](http://www.dentald.ru)

*Präzision seit 1968*

