

Каталог стоматология

№ 2



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide

Наш коллектив по всему миру



Патрик Хагер,
Генеральный директор

Михаэль Хагер,
старший советник



Головной офис в Германии



Hager Worldwide, Inc.
441-A 19th Street S.E.
Hickory N.C. 28602, USA
Тел.: (800) 328-2335, Тел.: (001) 828 624 3300
Факс: (800) 573-9392, Факс: (813) 926-7473
contact@hagerworldwide.com
Интернет: www.hagerworldwide.com
Генеральный директор: Mark Schneider



Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul. Gabczyńskiego 23
52-214 Wrocław
Тел.: +48 - 71-368-71-66
Факс: +48 - 71-368-10-21
biuro@hager.com.pl
Генеральный директор: Ania
Biernacka-Swienc



"HAGER EURASIA" OOO
127051, Москва, Россия
Цветной бульвар, 30, стр. 1
Тел.: +7 495 255 0902
o.seifert@hagerwerken.de
www.hager-werken.ru
Генеральный директор: Olga Seifert



HAGER PHARMA GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Тел. +49 (203) 99 269 900,
Факс +49 (203) 99 269 999
info@hager-pharma.de, www.hager-pharma.de
Генеральный директор: Klemens Böhm



Моб.(HK): +852-9168 0419
Моб.: +86-138 1780 6110
Тел.(HK): +852-2622 2796
Тел.: +86-21-6210 3519
kate@hagerasia.com.hk
Генеральный директор: Kate Tsui

Офис в г.Шанхай
Unit 1
20th Floor, Zhao Feng Trading Building
369 Jiangsu Road
20050 Shanghai China
Тел.: +86-21-5239 8136
Факс: +86-21-5239 8135
info@hagerasia.com

Офис в Гонконге
Unit 5 & 10, 9/F,
139-141 Hoi Bun Road, Seaview Centre
Kowloon, Hong Kong
Тел.: +852-2622 2795
Факс: +852-2622 2503
info@hagerasia.com.hk



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg,
Germany
Тел.: +49 (203) 99269-0
Факс +49 (203) 299283
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
Генеральный директор: Patrick
Hager



Ainsworth Dental Company Pty Limited
PO Box 5055
Marrickville NSW 1475
Тел.: +61 1300 602240
Факс: +61 1300 602250
www.ainsworthdental.com.au
info@ainsworthdental.com.au

Hager & Werken – Каталог

Наш каталог на русском языке предлагает широкий спектр новой, инновационной продукции. С годами каталог «Хагер & Веркен» стал местом презентации интересных новинок в области стоматологии, расходных материалов и инновационного малогабаритного оборудования. Мы стараемся обеспечить стоматологическое сообщество качественной продукцией и услугами высочайшего уровня.

Строгая система контроля качества является основой для нашего устойчивого успеха и роста. «Хагер & Веркен» внедрил жесткую систему контроля качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и ISO 13485 (сертификат TÜV Рейнланд, Кельн, Германия). Этим мы гарантируем, что продукция производится и реализуется в соответствии с максимально высокими стандартами.

На сегодняшний день не вся продукция из каталога имеет регистрационные удостоверения в Российской Федерации, но получение документов это очень сложная и затратная процедура, над которой мы продолжаем работать. Очень надеемся на понимание и немного терпения.

P. Hager

Содержание по названию продукта

Airsonic бокс-аспиратор	29	Happy Morning Travel Kit	20	Miratoi	42 – 44	Reflect-Rhod	14
Airsonic переходники	29	Happy Morning Xylitol	21	Miratrasy	6	Reso-Pac	4
Airsonic оксид алюминия	29	hf1 Surg	31	Miratrasy 140°	7	Röntgomarker	19
Airsonic Mini пескоструйник	29	H&W Classic	38	Miratrasy Implant	4	Spandex	13
Algilock Cleaner Plus	7	H&W OTG	38	Miratrasy Mini	6	Spandex-Vertical	13
Amalgam Well	17	Infant-O-Brush	25	Miratrasy Partial	6	Speed Labolight	32
Anti Stress зуб	39	I-Prox P	24	Miratrasy Spray	7	Study Model Child	40
Apply Tips аппликаторы	10	Kid's Brush	26	Mirawhite oxygen	25	Study Model Demo Implant	41
Bambach	36-37	LaserHF "comfort"	30-31	Napkin Holder Big	12	Study Model Transparent	40
Bravo Marathon Portable III	20	McTooth Mirror	45	Occlu-Print	19	Study Model Transparent De Luxe	40
Bravo TD II	32	Membranbox	9	Occlu Spray Plus	17	Tong-Clin De Luxe	25
Brilliant	14	Mira-2-Ton	22	Orange Solvent	11	Toothbrushing model	41
Brilliant Anti-Fog	14	Mirabrash	10	Parallelometer-Mirror	14	Variator Kit	15
Carebrush white	23	Mira Clean	21	Pelotte-Aspirator	8	Xylitol Chewing Gum	28
Chiru-Cleaner	8	Mira-Clin P	21	Pelotte Plus	8	Xylitol Drops	28
Comfort Dreams	39	Miraclip	12	Perfect Splint-System	16	Xylitol Kid's Gum	28
Cotton-Clip	12	Miracold Plus	11	Pic-Brush запасные ершики	24	Xylitol Powder	45
Crown Click De Luxe	16	miradent песочные часы	25	Pic-Brush Intro Kit	24	X-Ray Stain Remover	19
Emmenix Film Holder	18	Miradont Gel	23	Pick up Stick	10	Zahnpick	23
Emmenix Flap	18	Mira-Duo	39	Plantana	41		
Fit Kofferdam	34-35	Mirafloss	22	Plaque Agent	22		
Funny Animals	26	Mirafloss Big	20	Praxipolish Plus	11		
Gap Seal	5	Mirahold	13	Prosonic micro 2	27		
Gripit	16	Mirahold -Block	13	Protectoray	18		
halitosis spray	27	Miralay	12	Protho-Box	45		
Happy Morning	20	Miramatic Holder	17	Protho Brush De Luxe	23		
		Mirasuc Adapter	8	Protho Clean	15		
		Mirasuc Brush	8	Proto-Cam	38		
				Putzi-Pets	42		

Содержание по ключевым словам

Адаптеры для канюль	8	- дорожные	20	Оклюзионный спрей	17	- проявитель	19
Амальгама - емкость	17	- одноразовые с пастой	20-21	Отбеливание	25	- защитный щит	18
Анти-стресс	39	- для ежедневного чистки	23	Оттиски - см. слепки		- маркер для пленок	19
Аппликаторы и кисточки:		Зубочистки	23	Очистка и гигиена:		Реткаткоры:	
- аппликаторы	10	Игрушки:		- дезинфекция	11	- прикусные блоки	13
- кисточки	10	- наручные куклы	42	- щетки для канюль	8	- реткактор для щек и губ	13
- восковые палочки	10	- игрушки	42-44	- пена для очистки кожи	11	- ретрактор для щек	13
- монопучковая щетка	24	Имплантаты:		- средство для слепочных ложек	7	Роторасширитель	13
Аспиратор-бокс	29	- герметик для имплантатов	5	- для очистки от гипса	11	Релаксация пациента	39
Аспирационные калюни	8	- ложки для имплантатов	4	Очки	32-34	Свежее дыхание	27
БАМБАХ (Bambach)	36-37	- монопучковая щетка	24	Переходники для канюль	8	Светополимеризатор	32
Боксы с мембраной	9	Индикаторы налета	22	Периодонтальная повязка	4	Слепки:	
Ватные ролики - держатель	12	Интердентальные щетки	24	Полимеризатор	32	- ложки для имплантологии	4
Геометик	5	Инструменты:		Прикусные подушки	16	- ложки слепочные	4,6-7
Демонстрационные модели	40-41	- одноразовые набор	15	Протезы:		- адгезивный спрей	7
Детские щетки	25-26	Коагулятор	31	- щетка для очистки	23	- средство для удаления альгината	7
Ершики	24	Коффердам	34-35	- средство для полировки	15	- чаши для замешивания	16
Жевательная резинка:		Коронки:		Пескоструйная обработка:		Слюноотсосы	8
- Xylitol	28	- коронкосниматель	16	- пескоструйка	29	Стул-седло	36-37
Заморозка - спрей	11	- посадка коронки	12	- переходники	29	Таблетки для ополаскивания	21
Защитные очки	38	Крем для кожи	41	- бокс-аспиратор	29	Транспорт и хранение	9
Защитный щит	38	Крокодильчики	12	- оксид алюминия	29	Учебные модели	36 – 37
Звуковые щетки	27	Ксилит:		Песочные часы	25	Футляры	26
Зеркала:		- жевательная резинка	28	Послеоперативное лечение	4/23	Шинирование	16
- для осмотра	14	- конфеты	28	Полировочная паста	21	Шприцы - подставка	17
- для пациента	39	- песок	45	Пылесосы одноразовые	8	Электрические щетки	27
- металлические	14	Лазер	30-31	Раббердам	34-35	Xylitol:	
- для фотосъемки		Микромотор	20	Реставрация:		- зубные щетки	23
Зубная нить:		miradent	22-28	- штампики для фиссур	19	- жевательная резинка	28
- флосс с хлоргексидином	22	Модели	40-41	- препарирование	29	- конфеты	28
- настенный контейнер	20	Монопучковая щетка	24	Рентген:		- песок	45
Зубные щетки:		Мотивация пациента	36 – 37	- прикусные подушки	18	Язык - очистка	25
- детские	25-26	Налет - индикация	22	- держатель пленок	18		
		Наушники	39				

Miratray® Implant



Миратрэй Имплант: слепочная ложка с пленкой для протезирования на имплантах

- Избавит Вас и Вашего пациента от дополнительного приема у врача и сэкономит расходы лаборатории
- Контролируемый и безопасный оттиск при полном обзоре рабочего поля - прозрачная пленка
- Создает условия для аккуратной работы благодаря точному прилеганию пленки к трансферам
- Исключена утечка слепочной массы
- Индивидуализируемая, практичная и эффективная
- 3 стандартных размера на ВЧ/НЧ (для челюстей с зубами и без)
- Подходит для всех систем имплантатов и всех видов слепочных масс

“Больше нет необходимости изготовления индивидуальной ложки в лаборатории = экономия времени (приема) расходов для пациента.”
Петра Вайденомюллер, г.Магдебург



Видео

Описание изделия	Размер	Количество	Номер
Набор ассорти	6 x 1 шт. (ВЧ/НЧ размеры S, M, L)		101 250
ВЧ, S1	маленький	6 шт.	101 251
ВЧ, S2	средний	6 шт.	101 252
ВЧ, S3	большой	6 шт.	101 253
НЧ, I1	маленький	6 шт.	101 254
НЧ, I2	средний	6 шт.	101 255
НЧ, I3	большой	6 шт.	101 256

Reso-Pac®



Резо-Пак: периодонтальная повязка на основе целлюлозы

- Накладывается прямо на раны, швы и натертости
- Защищает от бактерий и ускоряет процесс заживления
- Держится до 30 часов и самостоятельно растворяется
- Идеальна для защиты ран и швов в имплантологии, пародонтологии, после удаления зуба, ортодонтии и протетики
- Идеальна как носитель медикамента
- Сохраняет эластичность, не обладает запахом и вкусом



Видео

Описание изделия	Масса	Номер
Резо-Пак	25 г	155 011
Резо-Пак, экономичная упаковка	5 x 25 г	155 010
Резо-Пак, отдельные порции	50 x 2 г	155 014

Гэп-Сил: решающее слово против периимплантита

- Надежно герметизирует все виды двухкомпонентных имплантатов
- Предотвращает проникновение микробов внутрь
- Предотвращает риск реинфекции периимплантарной ткани
- Эффективно устраняет основную причину периимплантита
- Уже более 16 лет успешно применяется при клиническом использовании в университете г.Дюссельдорф, Германия
- Одной карпулы хватает для 2-3 имплантата



Описание изделия	Номер
GapSeal набор (аппликатор + 10 карпул)	152 041
GapSeal запасная упаковка (10 карпул по 0.06 мл)	152 040
Аппликатор	152 042

Герметизация зазоров имплантатов против периимплантита

Ввиду особенностей производства имплантата зазоры и полости между имплантатом и абатментом неизбежны для всех составных имплантатов.

Эти зазоры могут быть сведены к минимуму в зависимости от точности изготовления. Однако, они все же остаются проницаемыми для бактерий и находятся в постоянном контакте с населенной микробами и грибами ротовой полостью. Микробы, размножающиеся в полостях, представлены большим количеством грамотрицательных, в основном, анаэробных бактерий, которые и вызывают периимплантит. Эти влажные и теплые полости имплантата представляют собой идеальную среду для размножения бактерий и частично вызывают поражение грибами. Еще 16 лет назад клиника челюстно-лицевой хирургии университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) под руководством профессора доктора Фритцмайера начала поиски решения этой проблемы. Зазор между супраструктурой и имплантатом составляет в среднем «лишь» 45 мкм, в то время как размер большинства бактерий, вызывающих периимплантит, составляет от 0,5 до 4 мкм.

На основе обширных исследований и испытаний был разработан материал для герметизации всех капиллярных зазоров и внутренних полостей составных имплантатов. Благодаря этому материалу он становится непроницаемым для бактерий.


GapSeal основан на особом составе, в который входит силиконовая матрица, создающая барьер, который эффективно предупреждает попадание бактерий. Этот материал используется непосредственно после установки имплантата при первом затягивании фиксирующего винта. Таким образом, имплантат оказывается надежно защищенным от размножения бактерий, вирусов и грибов с самого начала. GapSeal исключительно прост в применении, т.к. материал предлагается в небольших порционных упаковках. В комплект входит и специальный аппликатор.

GapSeal герметизирует зазоры и полости, которые имеются в любом составном имплантате.




Сразу после установки имплантаты обильно заполняют GapSeal перед установкой заглушки, а после перед установкой абатмента.

GapSeal®

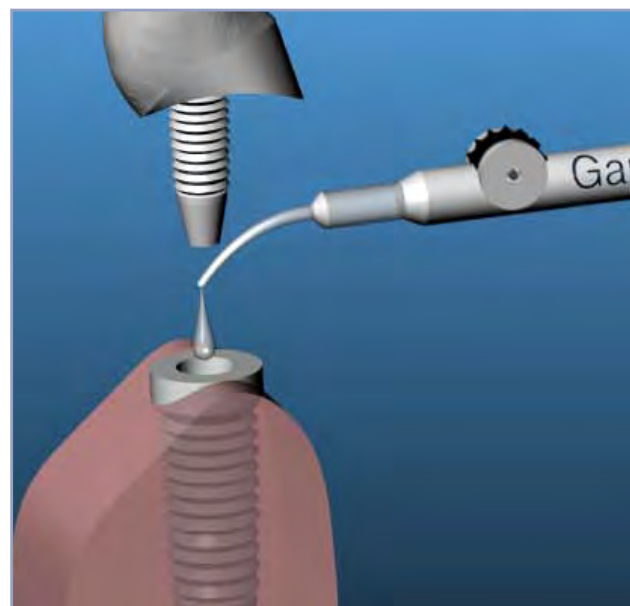

Видео

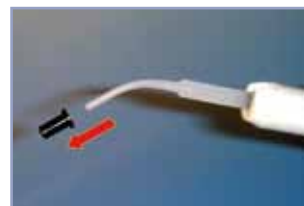

После снятия колпачка GapSeal сразу же вводится в установленный имплантат проворачиванием колесика.

Miratray® Mini



Миратрэй Мини: для отдельных слепков под коронки и маленькие мосты

- Недорогая одноразовая пластмассовая ложка
- При небольшом нагревании принимает ту или иную форму
- Легко надевается на пинцет
- Идеальна для пациентов с рвотным рефлексом
- Экономит слепочную массу

Описание изделия	Количество	Номер
Миратрэй Мини	50 шт.	101 102

Miratray®



Ретенция

Комплект I

50 целых/частичных ложек девяти разнообразных форм:

Форма: I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM

Количество: 10 10 5 5 5 5 3 3 4


Одноразовая ложка для оттисков из белой пластмассы

- Недорогая и надежная, при нагревании принимает ту или иную форму
- Отличная ретенция слепочной массы благодаря ретенционным отверстиям
- Практичное нанесение маркировки фломастером
- Полная ложка 6 размеров

Описание изделия	Размер	Количество	Номер
B4, S3	большой	50 шт.	101 142
B4, S2	средний	50 шт.	101 141
B4, S1	маленький	50 шт.	101 140
H4, I3	большой	50 шт.	101 145
H4, I2	средний	50 шт.	101 144
H4, I1	маленький	50 шт.	101 143

Описание изделия	Количество	Номер
Комплект I, в ассортименте	50 шт.	101 149

Miratray® Partiell

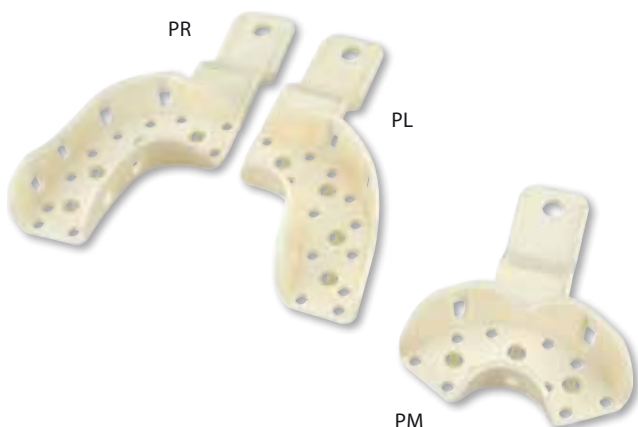

Частичные пластмассовые ложки для оттисков в трех формах

- Отлично подходит для пациентов с рвотным рефлексом
- Экономит слепочную массу

Описание изделия	Количество	Номер
Коробка правых, PR	100 шт.	101 148
Коробка левых, PL	100 шт.	101 146
Коробка срединных, PM	100 шт.	101 147

Ассортимент II

100 частичных ложек для оттисков 3-х размеров, в ассортименте:

Форма: PL PR PM

Количество: 33 33 34

Описание изделия	Количество	Номер
Комплект II, все 3 формы в ассортименте	100 шт.	101 151

Автоклавируемая пластиковая ложка для снятия слепков

- Прозрачная, при небольшом нагревании принимает условно ту или иную форму, и все же остается прочной
- Отличное ретенционное свойство массы благодаря специальным ретенционным отверстиям
- Позволяет наносить маркировку фламастером
- Полная ложка 6 размеров

Описание изделия	Размер	Количество	Номер
Набор ассотри		6 шт. (по 3 х ВЧ/НЧ)	101 155
ВЧ, AS 1	маленький	6 шт.	101 156
ВЧ, AS 2	средний	6 шт.	101 157
ВЧ, AS 3	большой	6 шт.	101 158
НЧ, AI 1	маленький	6 шт.	101 160
НЧ, AI 2	средний	6 шт.	101 161
НЧ, AI 3	большой	6 шт.	101 162

Адгезивный спрей

- Для лучшей адгезии слепочного материала и к пластмассовым, и металлическим слепочным ложкам
- Универсального применения, для слепочной массы, силикона, гидроколлоидов, и т.д.

Описание изделия	Объем	Номер
Миратрей спрей	225 мл	554 210

Средство для удаление альгината

- Очистка в погружной ванне без механического воздействия, без ультразвука, не царапает
- Разлагает органическую структуру слепочной массы, не обладает агрессивным или раздражающим воздействием, не дает ржаветь
- Слепочные ложки не тускнеют даже после многократных чисток
- Способный к биологическому разложению и pH-нейтральный, без содержания фосфата, приятный запах
- Для пр. 500 ложек
- Легко удаляет гипс и альгинаты со слепочных ложек, инструментов и лапаточек. Не трудоемкая и требующая много времени очистка, просто добавьте 50 г в один литр теплой воды и дайте настояться

Описание изделия	Масса	Номер
Альгилок клинер +	1000 г	554 104

Miratray® 140°



Miratray® Spray



Algilock® Cleaner Plus



Pelotte Plus




Автоклавируемые пластмассовые аспирационные канюли

- Очень приятные для пациентов, с круглой пилотой
- Также идеально подходят в детской стоматологии
- Ø 11 мм, длина 10,5 см
- Автоклавируемые

Набор с 10 штуками включая 1 адаптер (с Ø 11 мм на 16 мм)

Описание изделия	Количество	Номер
Цвет:зеленый	10 шт.	254 024
Цвет:голубой	10 шт.	254 025
Цвет:серый	10 шт.	254 026
В ассортименте (4 серого цвета, по 3 голубого и зеленого цвета)	10 шт.	254 029

Mirasuc® Adapter

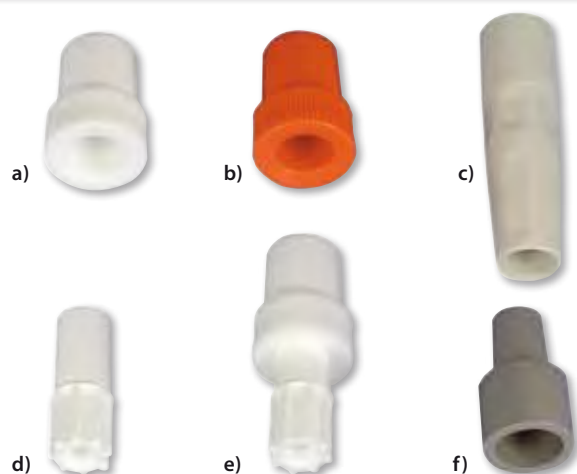

Переводники для слюноотсосов и пылесосов

- Пластмассовые, для всех ходовых аспирационных систем
- При сочетании адаптера а) и d) увеличение от 6 до 16 мм (е)

Описание изделия	Номер
а) цвет: белый, с 11 мм до 16 мм	254 130
б) цвет: оранжевый, с 11 мм до 16 мм	254 131
с) цвет: серый, автоклавируемая, ручка формы руки	254 133
Увеличение с 11 мм до 16 мм	
д) цвет: белый, от 6 мм (слюноотсос) до 11 мм	254 132
е) сочетание адаптера а) и d), с 6 до 16 мм	
ф) адаптер (цвет: серый) для сокращения с 16 мм до 11 мм	254 105

Mirasuc® brush




Щетка для очистки аспирационных канюль

- Эластичная, идеально подходит для чистки канюль внутри
- Для всех отсасывающих канюль с диаметрами Ø 11 мм и 16 мм

Описание изделия	Количество	Номер
Mirasuc brush	6 шт.	605 216

Chiru-Cleaner®

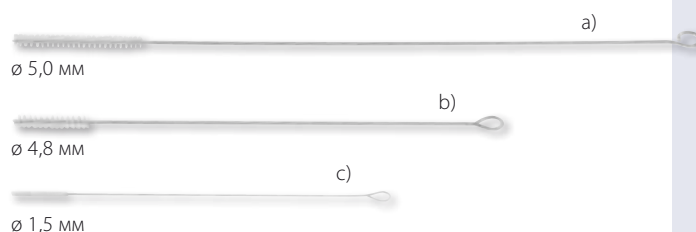

Щетки для очистки хирургических канюль

Описание изделия	Количество	Номер
а) Chiru-Cleaner 23, длина: 23 см	12 шт.	605 215
б) Chiru-Cleaner 16, длина: 16 см	6 шт.	605 217
с) Chiru-Cleaner 12, накладка из хлопка, длина: 12 см	5 шт.	605 213

Запатентованный бокс для транспортировки и хранения

- С двумя эластичными и прозрачными мембранами
- Надежный замок
- Никакого дребезжания, так как две мембранные пленки абсолютно бережно фиксируют даже самые маленькие части
- Штабелируемый

Описание изделия	Номер
XXL: для двух моделей	304 605



Запатентованный бокс для транспортировки и хранения

- С двумя эластичными и прозрачными мембранами
- Идеальное место хранения для безопасной пересылки высококачественных изделий
- Долгий срок службы благодаря высококачественному материалу
- Штабелируемый

Описание изделия	Номер
Размер М: для мостов, частичных протезов, аттачментов и т.д.	304 602

Запатентованный бокс для транспортировки и хранения с двумя внутренними мембранами

- Две мембранные пленки надежно и хорошо видимо держат содержимое
- Надежный замок
- Никакого дребезжания, так как две мембранные пленки абсолютно бережно фиксируют даже самые маленькие части
- Штабелируемый

Описание изделия	Номер
Размер S: набор с 12 шт. для коронок, вкладок и т.д.	304 603

Membranbox XXL



Размер: XXL (Ш x В x Г)
19.2 x 4.8 x 9.2 см

Membranbox Medium



Размер: М (Ш x В x Г)
8.5 x 2.2 x 9 см

Membranbox Small



Размер: S (Ш x В x Г)
4 x 1.9 x 4 см

Apply Tips®




Тонкие аппликаторы

- Для точечной аппликации жидкостей и паст
- Гнущиеся кончики для труднодоступных зон
- Экономное обращение с дорогими материалами (такими, как бондинг, протравка и т.д.)
- Кислотостойкие от воздействия бондинга и других материалов
- Гигиеническая дозатор-упаковка для вынимания отдельных палочек
- Доступны в трех размерах

Описание изделия	Количество	Номер
Средняя – стандартная, цвет: голубой	5 x 100 шт.	605 511
Тонкая – маленькая, цвет: белый	5 x 100 шт.	605 513
Коническая – коническая, цвет: зеленый	5 x 100 шт.	605 515
Дозатор для 500 палочек	без содержимого	605 516

Mirabrush®

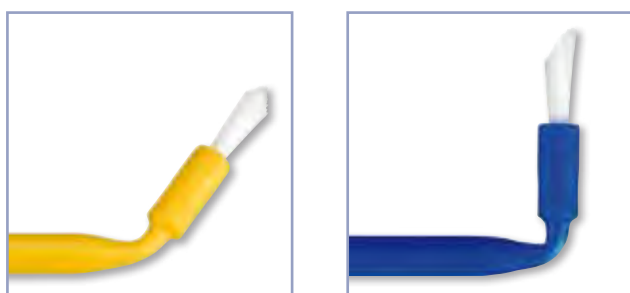

Эластичные аппликационные кисточки

- Цельная одноразовая кисточка
- Эластичная: гнется под любым углом
- Экономящая время: не нужно менять кисточку
- Желтая ручка = острая кисточка, точная аппликация
- Синяя ручка = плоская кисточка, большие участки

Дозатор-упаковка

Описание изделия	Количество	Номер
Стандартная 10 см, цвет: желтый/острая	100 шт.	605 460
Стандартная 10 см, цвет: синий/плоская	100 шт.	605 461

Pick up Stick



Палочки с воском для аппликаций

- Эластичные палочки с головкой с наклеенным воском
- Идеальны для быстрого и точного подхвата коронок, вкладок, виниров



Описание изделия	Количество	Номер
Pick up Stick	30 шт.	605 423

Очищающая пенка для ухода

- Без особых усилий удаляет грязь, разводы, пятна и т.д.
- Для стоматологических установок, пластиковых поверхностей, деревянных поверхностей и т.д.
- Поддерживает бактерицидную и дезинфицирующую очистку
- Протестирован "Институтом гигиены больницы и инфекционным контролем" (IKI Gießen)

Описание изделия	Объем	Номер
Praxipolish Plus	400 мл	554 208

Охлаждающий спрей

- Пр. -50 °C на аппликационной канюле (пластик)
- Запах апельсина
- Для проверки витальности зубов

Описание изделия	Объем	Номер
Miracold Plus	200 мл	554 213

Раствор для очистки

- Для удаления слепочных масс, цемента из оксида цинка, дисперсионного клея (наклейки на этикетки) инструментов
- Идеально подходит для чистки нержавеющей стали
- Поверхности сверкают и защищены
- Свежий аромат апельсина

Article description	Объем	Номер
Orange Solvent Spray	200 мл	554 201

Praxipolish® Plus



Miracold® Plus



Orange Solvent®



Miralay



Высококачественный инструмент для вкладок и коронок

- Инструмент с одинарными накусочными подушечками
- Автоклавируемый

Описание изделия	Количество	Номер
Miralay набор	2 инструмента + 4 подушечки	355 210
Miralay запасные подушечки (для надевания)	2 шт.	355 213

Miraclip®



Общая длина 42 см

Зажимы для салфеток

- Из автоклавируемого резинового материала с зажимом из нержавеющей металла

Описание изделия	Номер
Цвет: голубой	605 240
Цвет: желтый	605 241
Цвет: фиолетовый	605 242
Цвет: белый	605 243

Cotton-Clip



Держатель для ватных валиков

- Держит ватные валики для сухого рабочего поля
- Из легкой пластмассы или из солидной, автоклавируемой нержавеющей стали

Описание изделия	Количество	Номер
Cotton-Clip I, материал: пластмасса	100 шт.	605 350
Cotton-Clip II, материал: нержавеющая сталь	8 шт.	605 351

Napkin Holder Big



Длина: ок. 29 см

Растягивающиеся спиральные зажимы двух цветов



Описание изделия	Номер
Цвет: белый	605 277
Цвет: синий	605 278

Ретрактор для щек и губ

- Для хорошего обзора и свободного доступа к рабочему полю
- Идеально подходит при лечении фронтальных зубов и фотосъемке
- Из несветоотражающего пластика
- Автоклавируемый



Описание изделия	Количество	Номер
Стандартный	2 шт.	605 454
Мини (для детей)	2 шт.	605 455

Лидеры на мировом рынке! Производятся много десятков лет в Германии!

Ретрактор односторонний

- С длинной ручкой для свободного доступа к рабочему полю
- Практичен, напр. при инъекциях
- Комфортен для пациента
- Автоклавируемый

Описание изделия	Количество	Номер
Mirahold стандартный	2 шт.	605 450
Mirahold для детей	2 шт.	605 451

Экспандер для губ

- Открывает рот пациента в вертикальном направлении
- Для работы в десневой фронтальной области
- Автоклавируемый

Описание изделия	Количество	Номер
Spandex-Vertical (2 шт. размера M, 2 шт. размера L)	4 шт.	605 211
Spandex-Vertical Eco (размер M)	6 шт.	605 255

Упругие прикусные блоки

- Силиконовые блоки для надежного удержания рта между НЧ и ВЧ
- В набор входит специальный держатель для щеки
- Идеально подходит при долгих процедурах и для боязливых пациентов
- Автоклавируемые

Описание изделия	Номер
Набор (12 прикусных блоков, по 6 маленьких и больших и 2 держателя для щек)	605 210
Стартовый набор из 6 прикусных блоков, по 3 маленьких и больших и 1 держателя для щек	605 238
Мини-набор из 3 прикусных блоков (маленькие)	605 220
Держатель щеки отдельно	605 239


Spandex®



Mirahold®



Spandex®-Vertical

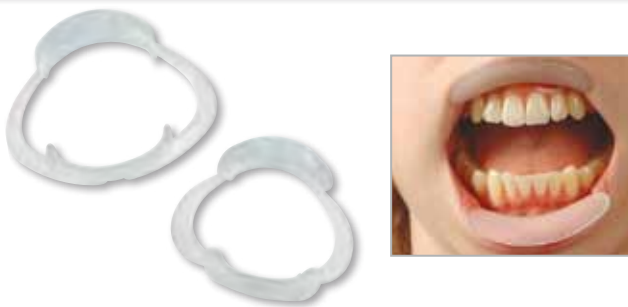

Mirahold®-Block



Brilliant Anti-Fog



Ø 19 mm




Brillant

Ø 23 MM



Reflect-Rhod

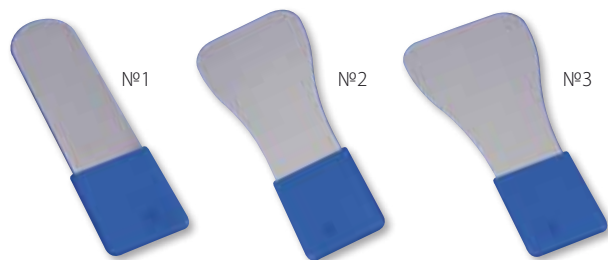

Parallelometer



Незапотевающее пластмассовое одноразовое ротовое зеркало

- С антизапотевающим покрытием
- Плоская, изогнутая головка зеркала открывает видимость ко всем местам в полости рта
- Эргономичная ручка
- Каждое зеркало защищено пленкой и отдельно упаковано, 50 штук
- Идеально для самостоятельного контроля в домашних условиях

Описание изделия	Количество	Номер
Цвет: белый, ø 19 мм	50 шт.	605 416
Цвет: голубой, ø 19 мм	50 шт.	605 417
Цвет: розовый, ø 19 мм	50 шт.	605 418

Одноразовое пластмассовое ротовое зеркало

- Без антизапотевающего покрытия
- Двух размеров: Ø 19 мм и Ø 23 мм
- Каждое зеркало защищено пленкой и отдельно упаковано, 100 штук

Описание изделия	Количество	Номер
№ 4, цвет: белый, ø 19 мм	100 шт.	605 400
№ 5, цвет: белый, ø 23 мм	100 шт.	605 399

Зеркало для фотосъемки с родиевым покрытием

- Идеально подходит для свободных от искажений внутривитровых съемок
- Дорогостоящее родиевое покрытие(с одной стороны)
- Прочное, долговечное
- Со съемной силиконовой ручкой
- Автоклавируется в специальном мешочке входящем в комплект

Описание изделия	Номер
Набор (3 зеркала)	355 480
№. 1 одиночное (40 x 163 мм)	355 481
№. 2 одиночное (69 x 163 мм)	355 482
№. 3 одиночное (79 x 163 мм)	355 483
Отдельно: силиконовая ручка	355 487

Зеркало с параллельными линиями

- Подходит для всех ходовых ручек зеркал (не входит в комплект поставки)
- Для проверки препарированных зубов
- Автоклавируемое

Описание изделия	Номер
Зеркало-параллелометр	355 470

Одноразовый набор для процедур

- Содержит ротовое зеркало, пинцет и зонд
- Большой шпатель для замешивания цемента и наполняющих материалов
- Сферическая головка и шпатель Гайдемана для наполнения
- Практичен при посещениях на дому, для пациентов группы риска и при неотложных случаях
- Все три инструмента стерилизованы гамма-излучением и упакованы в блистерную пузырчатую упаковку

Описание изделия	Количество	Номер
Variator-Kit	10 наборов	355 441

Полностью синтетическое средство по уходу для очистки и зеркальной полировки пластиковых протезов

- Эстетическая повышение ценности показа Вашей работы
- Для удаления остатков полировочного материала и мономер
- Просто побрызгайте, немного подождите, пока начнет свое действие, вытрите мягкой тряпочкой
- Приятный вкус мяты

Описание изделия	Объем	Номер
Protho Clean	75 мл	554 220

Variator®-Kit



Protho Clean®



Crown Click® De Luxe




Механический коронко-и мостосниматель

- Очень действенный благодаря импульсным щелчкам
- Просто разместить конец инструмента под краем коронки и запустить кнопку "нажать"
- Наконечники инструмента трех видов с дополнительной петлевой насадкой (в виде опции)
- Быстрое, действенное и простое снятие коронок и мостов
- Высококачественная, матовая нержавейка, автоклавируется



Описание изделия	Номер
Набор: инструмент с насадками (№№. 1–3)	452 205
Насадка №1 (длинная)	452 206
Насадка №2 (короткая)	452 207
Насадка №3 (короткая + уголок)	452 208
Петлевая насадка №4 (вкл. адаптер)	452 209

Gripit®

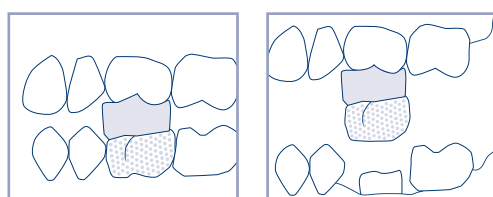


Подушечки для прикуса с большой адгезивной способностью

- Для удаления временных пломб, вкладок и коронок
- Подушечки подогреть, позиционировать на нужной единице и прикусить. После этого резко открыть рот
- Безопасные и очень приятные для пациента
- Гигиеничная упаковка по 2 штуки

Описание изделия	Количество	Номер
Gripit	50 (25 x 2) шт.	605 283

Perfect Splint-System

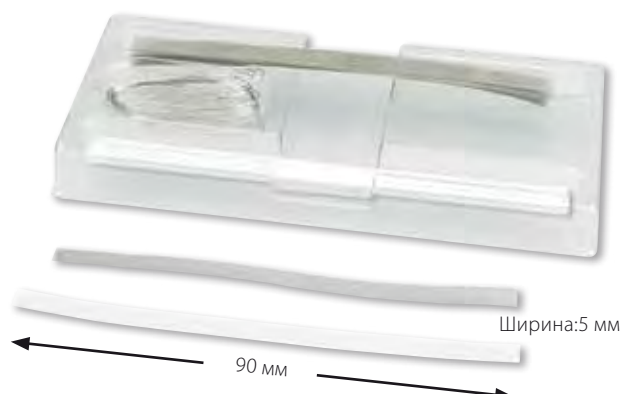

Прямая шинирующая лента

- Режущаяся лента из капрона (ПЭТ) или из нержавеющей металла для шинирования
- Одной упаковки хватает для шинирования около 200 зубов

Полный набор

Описание изделия	Номер
По 10 лент из металла и капрона, помощь для крепления (ортодонтическая проволока)	152 280

Высококачественный окклюзионный спрей зеленого цвета

- Для маркировки контактных пунктов благодаря прямому распылению на окклюзионные места
- Микро-порошковый слой для особой точности
- Пластиковая насадка для особо тонкого распыления
- Порошковый слой легко удаляется при помощи воды
- Экономное потребление

Описание изделия	Объем	Номер
Аэрозоль, цвет:зеленый	75 мл	554 205

Прочный безопасный держатель для всех шприцев

- Предотвращает риск травмирования иглами, которые лежат без упаковки на передвижном столике
- Замена одной рукой предотвращает риск травмирования
- Шприц стоит вертикально в своей собственной защитной упаковке
- Фиксирующий зажим надежно удерживает защитную оболочку
- Материал:нержавеющая сталь, вес: ок. 220 г
- Подходит для всех инъекционных шприцев

Описание изделия	Номер
Miramatic Holder Plus	355 466

Емкость для амальгамы из нержавеющей стали

- Легко брать благодаря простой воронкообразной форме
- Позволяет брать амальгаму без контакта с телом
- Устойчивое и противоскользящее покрытие
- Автоклавируется

Описание изделия	Номер
Amalgam Well	355 000

Occlu® Spray Plus




Miramatic® Holder Plus



Amalgam Well



Emmenix® Film Holder

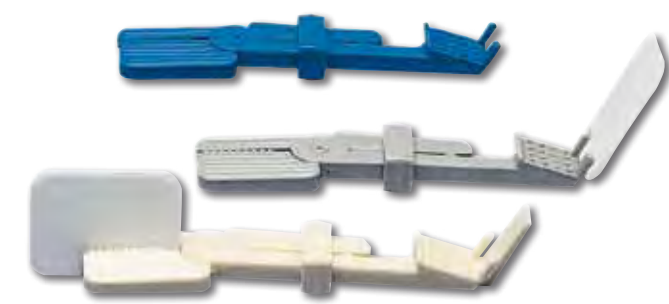

Гигиенический держатель рентгеновской пленки

- Легкая фиксация пленки во рту пациента без помощи пальцев (никакого раздражения слизистой оболочки, никакого рвотного рефлекса)
- Точная, так как пленка не прогибается, никакого искажения съемки
- Для съемки передних зубов и моляров, а также непосредственно зубов мудрости
- Автоклавируемый, прочный пластик
- 3х цветов: белый, синий, серый


Описание изделия	Номер
Упаковка, 3 штуки в ассортименте	656 300

Emmenix® Flap



Мягкие накусочные подушечки для рентгеновской пленки

- Специальный вспененный материал с высокой адгезией
- Закрылок может по-любому и наиболее оптимально закрепляться на пленке
- Идеально подходят для рентгенографии прикуса, передних зубов, премоляров и моляров

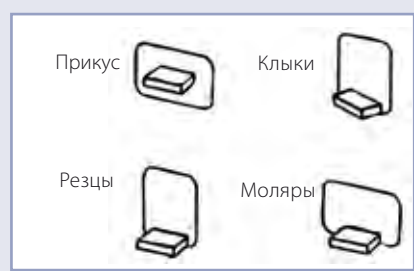

Описание изделия	Количество	Номер
Emmenix-Flap	500 шт.	656 303

Protectoray



Защитный экран от рентгеновских лучей

- Защитный экран для пациента от рентгеновских лучей
- 0.5 мм свинцовая прокладка для оптимальной безопасности
- Соответствует DIN 6813
- Тестирована Немецким институтом защиты от излучения, г.Мюнхен, Германия
- Приятно для пациента-никаких тяжелых фартуков
- Простая замена ручки



Protectoray настенный держатель

Описание изделия	Номер
Экран и ручка	656 127
Protectoray настенный держатель	656 128

Маркер для рентгеновских снимков

- Водостойкая, белая краска
- Очень точная, стойкая и тонкая игла ручки



Описание изделия	Номер
Маркер для рентгеновских снимков	656 322

Жидкость для удаления пятен

- Высокоэффективная и прошедшая проверку временем
- Удаляет рентгеновские химикаты, йод, ржавчину и т.д.

Описание изделия	Объем	Номер
X-Ray Stain Remover	100 мл	656 220

Röntgomarker®



X-Ray Stain Remover




Штампики для выведения окклюзии при композитных реставрациях

- Простое и быстрое выведение фиссур в боковой группе зубов
- Быстро и легко, больше не нужна мануальная модуляция жевательной поверхности
- Пропускающий свет пластик, дезинфицируемый
- Полимеризация путем насадки лампы на штампик
- Одноразовые штампы для моляров и премоляров 16 различных размеров и форм, сортированы по ВЧ/НЧ и правой/левой
- Для легкой идентификации номер зуба помечен сверху штампика

Описание изделия	Номер
Intro kit с 32 печатями (16 x 2 шт.)	605 494
Набор со 160 печатями (16 x 10 шт.)	605 477

Дополнительные блоки с 10 шт. доступны по запросу в 16 размерах

Occlu-Print®

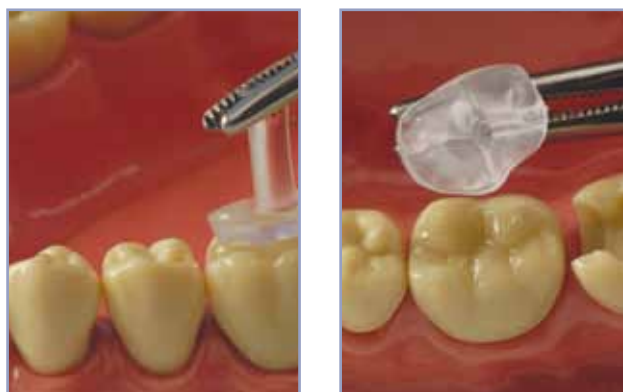

Bravo Marathon Portable III



Улучшенная модель портативного микромотора

- Компактный легкий дизайн (вес 300 г)
- Регулируемая скорость от 4,000 до 35,000 об/мин
- Перезаряжаемая литиевая батарея – продолжительность работы 12 ч
- Время зарядки составляет всего лишь 5 часов
- Бесщеточный двигатель как представитель класса электродвигателей обеспечивает высокую скорость и обороты
- Индикатор скорости и зарядки батареи на большом ЖКИ-экране



Описание изделия	Номер
Bravo Portable III с сумкой и зарядным устройством	452 130

Happy Morning®



Одноразовая зубная щетка

- Идеально подходит для чистки зубов перед сеансом в стоматологическом кабинете, во время коротких поездок и т.д.
- Отдельная гигиенически чистая упаковка



Описание изделия	Количество	Номер
a) С напылением зубной пасты	100 шт.	605 401
b) Без зубной пасты	100 шт.	605 403

Happy Morning® Travel Kit



Попутчик по уходу за зубами

- Зубная щетка и тюбик (3 гр) с освежающей мятной зубной пастой
- В дорогу и для использования время от времени
- Зубная щетка и паста в отдельной гигиенически чистой упаковке
- Зубные щетки пяти разных цветов, в ассортименте, 5 x 10 шт.

Описание изделия	Количество	Номер
Happy Morning Travel Kit	50 шт.	605 410

Mirafloss® Big



Дозатор зубного флосса с креплением на стену с двумя катушками по 200 метров

- Идеально подходит для использования в стоматологическом кабинете
- Управление одной рукой благодаря металлическому режущему канту
- Можно постоянно пополнять

Описание изделия	Content	Номер
Mirafloss Big - (цвет: белый, воощенный / черный, мятный)	2 x 200 м	605 735
Запасная упаковка: черный, мятный	200 м	605 737
Запасная упаковка: белый, воощенный	200 м	605 736
Запасная упаковка: белый, не воощенный	200 м	605 738

Таблетки для полоскания рта

- Освежающие, с немного антисептическим действием, охлаждающие
- Маленькая дополнительная услуга для пациента
- Таблетки полностью растворяются макс. через 3 минуты
- В двух приятных вкусах: мяты и тимола

Описание изделия	Количество	Номер
Вкус:мята (цвет:зеленый)	1,000 таблеток	605 504
Вкус:тимол (цвет:розовый)	1,000 таблеток	605 505

Хорошо зарекомендовавшая себя профилактическая паста с мелкой фракцией

- Для профессиональной чистки зубов в стоматологическом кабинете
- Низкая абразивность при оптимальном эффекте очистки
- Приятный фруктовый вкус
- Без содержания фторида и ментола



Описание изделия	Вес	Номер
Mira-Clin P	250 г	605 656
Коробка: 200 порций по 2 г и кольцо из нержавеющей стали II		605 658

Одноразовая зубная щетка с ксилитом

- Щетинки с напылением ксилитосодержащей зубной пастой
- Короткая головка щетки (2,5 см)
- Отдельная гигиеническая упаковка
- Идеально подходит для путешествий, для использования время от времени и как гостевая зубная щетка
- Ксилит предотвращает кариес, уменьшает количество бактерий, образующих зубной налет и кислоты



После еды



В поездке



В офисе



Перед свиданием

Описание изделия	Количество	Номер
Happy Morning Xylitol	50 шт.	605 496

Mira Clean®



Mira-Clin P®



Happy Morning® Xylitol



Mirafloss®



Зубная нить/катушка

- Особо тщательная очистка межзубных промежутков
- Особо прочная, без расплывания волокон
- Зубная нить в катушке: невоощенная, из политетрафторэтилена, отлично проходит через узкие межзубные промежутки

Описание изделия	Content	Номер
Зубной флосс	20 м	630 022
Зубной флосс с хлоргексидином	20 м	630 078
Зубная нить, невоощенная	20 м	630 077

Mira-2-Ton® Solution



Индикатор зубных отложений

- Жевательные таблетки или раствор
- Старый зубной налет становится синего цвета, новый-розового цвета
- Прошел проверку временем в стоматологических кабинетах
- Удобный для пациентов, мотивирующий
- Не содержит эритрозин и глютен
- Окраска снова удаляется при чистке зубов
- Легко поделить – одной таблетки хватает на два использования

Описание изделия	Content	Номер
Mira-2-Ton раствор	60 мл	605 655
Mira-2-Ton раствор	10 мл	605 659
Mira-2-Ton раствор, Display	10+2 x 10 мл	605 660

Mira-2-ton таблетки

Описание изделия	Количество	Номер
Mira-2-Ton таблетки	6 шт.	631 027

Таблетки для теста на наличие зубного налета + ротовое зеркало

- 3 таблетки и одно зеркало для самоконтроля в дома

Описание изделия	Номер
Plaque Check с зеркалом синего цвета	631 044
Plaque Check с зеркалом розового цвета	630 045

Plaque Agent



Раствор для полоскания рта для контроля эффективности чистки зубов

- Существующий зубной налет окрашивается в синий цвет
- Приятный вкус "бубль-гум"
- Готовый к употреблению, мотивирующий, для детей
- Окраска легко удаляется при чистке зубов
- Применение: 1–2 раза в день по 10 мл, полоскать во рту пр. 30 секунд перед чисткой зубов
- Не содержит эритрозин и алкоголь
- вкл. мерный колпачок

Описание изделия	Content	Номер
Plaque Agent	500 мл	631 096

Гель с питательными микроэлементами для ухода за полостью рта

- Средство по уходу за полостью рта с питательными микроэлементами
- Самый благоприятный целебный климат благодаря физическому изменению микрофлоры полости рта
- Особенно подходит после операционных вмешательств и при пародонтальных процедурах, афтах, лишаях, прогрессирующих поражениях герпесом и на участках натертышей протезами
- Ускорение восстановления ткани
- Без добавления алкоголя, сахарина, ментола и консервантов
- Нейтральный привкус

Описание изделия	Объем	Номер
Miradont-Gel	15 мл	155 000

Зубная щетка с эффектом отбеливания

- Резиновые ламели для отбеливания
- Специальный кончик для лучшей очистки во внутренней части рта
- Расположенные крест-накрест ворсинки для эффективной очистки межзубных промежутков
- Эргономичная ручка с резиновыми выступами
- Доступна в двух цветах

Описание изделия	Номер
Carebrush, цвет:белый, зеленый	630 190
Carebrush, цвет:белый, розовый	630 191

Щетка для протезов

- С двумя головками щетки:большое щетинное поле для чистки внешних сторон, маленькая головка для чистки внутренней бороздки
- Эргономичная ручка

Описание изделия	Номер
Цвет: голубой	631 024
Цвет: розовый	631 025

Практичная комбинация из зубной нити и зубочистки

- 30 штук: практичная коробочка

Описание изделия	Количество	Номер
Zahnpick	30 шт.	630 039

Miradont®-Gel



Carebrush white



Protho Brush® De Luxe



Zahnpick®



Pic-Brush® Intro Kit




Набор с четырьмя ершиками

- Эргономичная ручка с наклоном в 120°
- Универсальные высококачественные эластичные ершики, ультратонкие ворсинки
- Защита от повреждения благодаря сложному изготовлению петли наконечника проволоки
- Ручка с контейнером для хранения ершиков
- Также для чистки брекетов, мостов и зубных протезов



Хранение ершиков

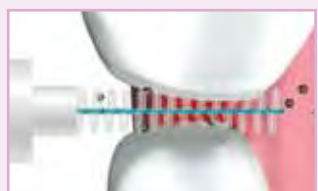

Описание изделия	Цвет	Номер
Держатель с 4 ершиками	голубой	631 005
Держатель с 4 ершиками	розовый	631 006

Pic-Brush® запасные ершики

Design


pink xx-fine		ø 0.45 mm		ø 1.6 mm
yellow x-fine		ø 0.5 mm		ø 1.8 mm
white fine		ø 0.6 mm		ø 2.0 mm
green medium		ø 0.8 mm		ø 2.2 mm
blue large		ø 0.8 mm		ø 3.0 mm
bordeaux x-large		ø 0.8 mm		ø 6.5 mm
orange conical		ø 0.5 mm		ø 2.5 - 5.0 mm

В гигиенически чистой упаковке для хранения



Описание изделия	Количество	Номер
Розовый	6 шт.	630 013
Желтый	6 шт.	630 014
Белый	6 шт.	630 015
Зеленый	6 шт.	630 016
Голубой	6 шт.	630 017
Бордовый	6 шт.	630 050
Оранжевый	6 шт.	630 018

I-Prox® P

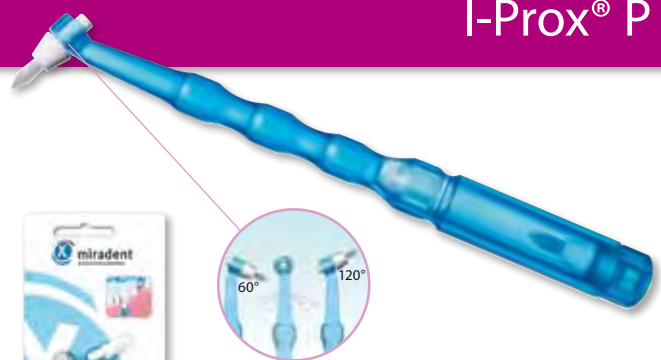

Система переключения

Разъем допускает два стыкуемых уголка для различных возможностей применения



Моляры



Брекеты

Монопучковая щетка для применения с предельной точностью

- Эффективная чистка десневой бороздки благодаря коническому сужающемуся пучку ворсинок
- Идеально подходит для чистки челюстно-лицевых областей, имплантатов и межзубного пространства
- Оптимальная аппликация препаратов, гелей и паст
- Эргономичная ручка (14 см) с двумя стыкуемыми уголками (60° и 120°)
- Ручка с контейнером для хранения запасных щеток

Описание изделия	Номер
Держатель, цвет: голубой, вкл. 4 насадки	631 032
Держатель, цвет: розовый, вкл. 4 насадки	631 033
Запасные щетки, 4 шт.	631 034



Имплантаты



Десневые карманы



Аппликации

Эффективное отбеливание для чувствительных зубов

- Гигиеническая аппликация кисточкой
- Отбеливание зубов без перекиси при помощи активного кислорода
- Защита зубной эмали и десен
- Отбеливание зубов до пяти оттенков
- Период аппликации 7 дней, два раза в день

Описание изделия	Content	Номер
Mirawhite oxygen	1.8 мл	631 097

Щетка-скребок для языка

- Двойная функция в одном инструменте:
 - Щеточка с короткими закругленными ворсинками поднимает налет
 - Скребок снимает после этого отделенный налет
- Изогнутая плоская круглая форма снижает рвотный рефлекс
- Удобная ручка, с защитным колпачком

Описание изделия	Номер
Голубой	631 029
Розовый	631 030

Учебная зубная щетка

- Способствует в игровом режиме регулярному уходу за зубами
- Прорезыватель для зубов с особо мягким полем ворсинок
- Выступы способствуют прорезыванию зубов
- Овальная форма предохраняет от опасности заглатывания и травмирования
- Для младенцев от пр.3 месяцев

Описание изделия	Номер
Красный	631 026

Специально разработанные для детей песочные часы для контроля времени при чистке зубов


- Идеально подходит для соблюдения рекомендуемого минимального времени чистки
- Время цикла: 2 минуты
- С чашечной присоской для крепления на всех плоских поверхностях

Описание изделия	Номер
miradent песочные часы	630 068

Mirawhite® oxygen



Tong-Clin De Luxe®

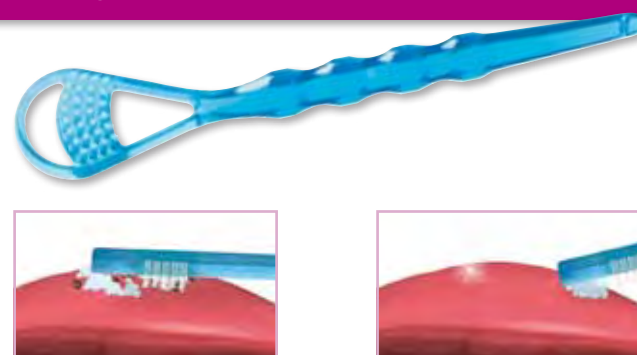

Infant-O-Brush®



miradent® Sanduhr



Kid's Brush



Детские зубные щетки

- Маленькая головка щетки с овальным щеточным полем
- Ровное щеточное поле с мягкими, закругленными ворсинками из полимера
- "Верхняя часть тела" раскладывается и защищает щеточное поле
- Циркуляция воздуха при открытии защитного колпачка
- Ручка щетки одновременно служит практичным основанием
- Для детей от четырех лет


Описание изделия	Номер
Утка	630 046
Попугай	630 047
Мишка	630 048
Собака	630 049
Бык	630 051
5 шт. в ассортименте	605 820

Funny Animals

Гигиенические футляры для зубных щеток

- Простое хранение и доставание зубной щетки
- Запатентованная защелка
- Две присоски служат для крепления на всех плоских поверхностях
- Вентиляционные отверстия создают циркуляцию воздуха
- Подходят для всех ходовых зубных щеток

Описание изделия	Номер
Забавная корова	630 099
Забавный слон	630 100
Забавная зебра	630 101
Забавный лев	630 102
Забавная свинья	630 103
Забавная собака	630 104

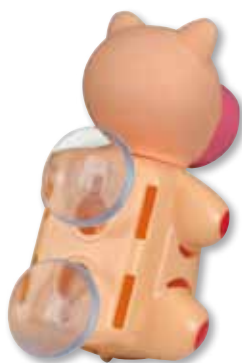

Чашечные присоски
для крепления на всех
плоских поверхностях



Спрэй по уходу за полостью рта с мгновенным эффектом свежего дыхания

- Устранение запаха из-за рта (галитоз), активными компонентами
- Лечебные свойства по уходу за зубами благодаря ксилиту (10 %)
- Без алкоголя

Описание изделия	Content	Номер
halitosis spray	15 мл спрэй	630 168
halitosis spray, стенд	12 балончиков	AK-1203



Звуковая электрическая зубная щетка

- Удаляет зубной налет
- 30.000 микровибраций в минуту
- Очиститель языка на оборотной стороне головки зубной щетки
- С батарейками (AAA)
- Вес: 60 г
- Набор запасных щеток, состоящие из 2 головок + 4 колец с цветовым кодированием

Описание изделия	Номер
Prosonic micro 2	630 182

Описание изделия	Номер
Prosonic micro 2 набор насадок	630 183

halitosis Spray



Prosonic micro 2



Prosonic micro 2 насадки



Xylitol Chewing Gum



Мята
колосковая



Мята
перечная



Корица



Фрукт



Клюква



Зеленый
чай



Жевательная резинка для ухода за зубами

- На 100 % послажена ксилитом
- Не содержит аспартам, сорбит, лактозу и глютен
- Избавляет от сухости во рту
- Мята и мята перечная содержат ментол
- Привлекательный для покупателя упаковка из акрила по согласованию с клиентом

Тубусная упаковка с 30 подушечками

Описание изделия	Номер
Мята	630 079
Мята перечная	630 080
Корица	630 081
Свежие фрукты	630 082
Клюква	630 090
Зеленый чай	630 091

Диспенсерная упаковка с 200 штуками по 2 драже в каждой

Описание изделия	Номер
Диспенсерная упаковка, ассорти	635 069

Xylitol Drops



Вишня



Дыня



Мята



Конфеты для ухода за зубами, со 100 % ксилитом - без содержания сахара и заменителей

- Предотвращают кариес и реминерализуют
- Увеличивают выделение слюны, препятствуют образованию зубного налета
- Не содержат аспартам, сорбит, лактозу и глютен - идеальны для диабетиков
- Прохладно-освежающий вкус

Описание изделия	Content	Номер
Драже ксилитом, дыня	60 г / 26 шт.	630 170
Драже ксилитом, вишня	60 г / 26 шт.	630 171
Драже ксилитом, мята	60 г / 26 шт.	630 172

Диспенсерная упаковка со 100 леденцами - упакованы поштучно

Описание изделия	Номер
Диспенсерная упаковка с леденцами, ассорти	635 183

Xylitol Kid's Gum




Детская жевательная резинка для ухода за зубами

- Для предупреждения кариеса
- Реминерализующая
- Препятствует образованию зубного налета
- Специально разработанный для детей дизайн


Описание изделия	Номер
Яблоко, 30 подушек	630 192
Стенд, 12 штук по 30 подушек	635 203

Ручной пескоструйный аппарат

- Для обработки поверхностей коронок, мостов, брекетов, штифтов и т.д.
- Тщательно обработанные поверхности обретают лучшее адгезивное свойство для оптимального сцепления различных материалов
- Идеально подходит для любого металла и керамики
- Также и для удаления остатков цемента из коронок и мостов

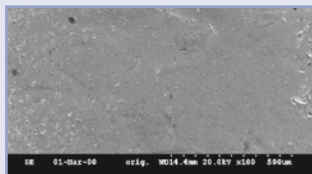

Перед пескоструйной обработкой

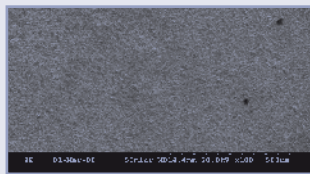

После пескоструйной обработки

Описание изделия	Номер
Эйрсоник мини, с насадкой 60° и 20 г порошка (50 мкм)	401 080

Al₂O₃ порошок из оксида алюминия для пескоструйных работ

Описание изделия	Вес	Номер
Airsonic Alu-Oxide, 50 мкм	500 г	605 084
Airsonic Alu-Oxide, 90 мкм	500 г	605 086

Описание изделия	Номер
a) Переходник Каво для прямого соединения	401 084
b) Переходник Sirona для прямого соединения	401 089
c) Переходник W+H Rotoquick	401 077
d) Переходник Bien Air Unifix	401 076
e) Переходник EMS	401 090
f) Переходник с лабораторным выключателем	401 091
g) Переходник NSK	401 075

Портативный бокс-аспиратор

- Переносной бокс-аспиратор: пыль и порошок остаются в боксе и полностью собираются в фильтре
- Очень тихий и мощный прибор
- Надежное исполнение, рассчитанное на длительный срок эксплуатации
- Простое обслуживание при чистке вынимаемого фильтра
- Идеально подходит для стоматологических кабинетов и лабораторий в комбинации с мини-пескоструйным аппаратом Airsonic (Номер 401 080)
- Нет необходимости в отдельной системе вытяжки

Технические данные:

Размер (Шх В х Г): 35,6 см x 22 см x 37 см

Вес: всего лишь 2,8 кг

Комплектующие по запросу

Описание изделия	Номер
Airsonic бокс-аспиратор	401 082


Airsonic® mini



Airsonic® Alu-Oxyd



Airsonic® переходники

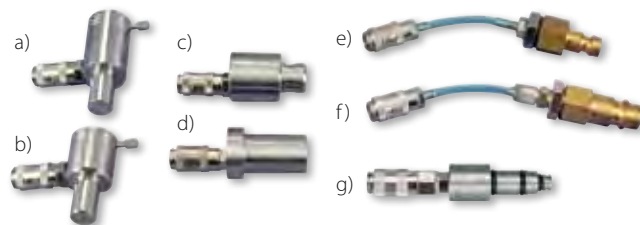

Airsonic® аспиратор





LaserHF® „comfort“

Терапевтический лазер



	Для всех использований:		
	Лазер	ВЧ	ВЧ-Лазер
Хирургия	●	●	●
Пародонтология	●	●	●
Имплантология	●	●	●
Эндодонтия	●	●	●
Отбеливание	●	●	●
aPDT	●	●	●
LLLT	●	●	●

Высокочастотная хирургия: оптимальное направление разреза и коагуляция

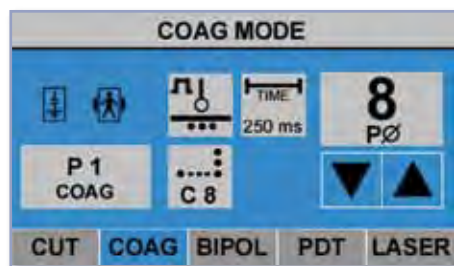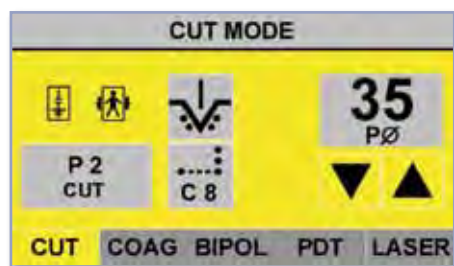

Режет



Коагулирует

Комбинированный аппарат с лазерной и высокочастотной технологиями

- I-Cube дизайн с сенсорной панелью управления
- Предварительно установленные программы для всевозможных манипуляций в стоматологии и дерматологии
- Возможность индивидуального программирования
- Максимальная функциональность и гигиена
- Монитор с сенсорным экраном для простого управления и выбора программ

ЛАЗЕР:

- Дезинфекция и чистка десневых карманов при пародонтозе
- Дезинфекция после обработки корневого канала в эндодонтии
- Удаление мягких тканей, напр. в имплантантной хирургии при периимплантите
- Заживление ран, облегчение болей и гипосенсибилизация благодаря лазерному излучению низкой интенсивности (ЛИНИ)
- ФДТ-лазер (фотодинамическая терапия)
- В виде опции: ускоренное отбеливание зубов при помощи лазерного излучения

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА:

- Два независимо работающих друг от друга наконечника со сменными электродами (с цветовым кодированием): режущий- и режущий-/коагуляционный, цвет: желтый, коагуляционный, цвет: синий
- Три частоты обеспечивают все способы лечения: разрезы, разрезы с коагуляцией для остановки кровотечения, коагуляция, импульсная коагуляция для приваривания маленьких лоскутков ткани
- Автоматическая регулировка напряжения
- Биполярный hf-пинцет заказывается дополнительно

Технические характеристики:

Мощность высокой частоты: макс. 50 Вт
ВЧ-частота 2,2 МГц
ФДТ-лазер: 660 Нм / 100 мВт
Лазер 975 нм / 6 Вт – непрерывный/ импульсный
Размер (Ш x В x Г): 30 x 13 x 25 см
Питание от сети: 230 V / 50 Hz
ВЧ 2,2 МГц / 50 Вт - монополярный / биполярный
Вес ок. 3,5 кг



Отчет
пользователя

Базовая комплектация

2 наконечника для лазера (красный для лазера 6 Вт, оранжевый для терапевтического лазера)
1 x стекловолоконная насадка 200 мкм (набор 3 шт) + 1 x
стекловолоконная насадка 320 мкм (набор 3)
Защитные очки Lambda One (800 – 975 Нм)
Двойные очки Skyline (цвет:зеленый, 800 – 975 Нм)
Двойные очки Skyline (цвет:синий, 657 – 660 Нм)
Защитные очки для пациента
2 автоклавируемые ВЧ-ручки
Набор электродов (№ 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Нейтральный электрод
Контакт блокировки дверей / "интерлок"
Блок ножного управления
Инструкция по эксплуатации, каталог медицинской продукции



Видео

hf-биполярный пинцет заказывайте дополнительно!

Стандартный аппарат ЛазерВЧ можно заказывать и впрямь.

Описание изделия	Номер
LaserHF „комфорт“	452 471
LaserHF Стандарт	452 462
hf биполярный пинцет, 110 мм, закругленный	452 447
hf биполярный пинцет, 160 мм, закругленный	452 455



Обнажение имплантата



Эндодонтия



Иссечение уздечки



Герпес



ЛИНИ



аФДТ

Универсальный высокочастотный хирургический аппарат

- Предварительно установленные программы для всевозможного использования + дополнительные возможности для индивидуального программирования
- Серийное производство с возможностью подключения биполярного пинцета
- Максимальная функциональность и гигиена
- Монитор с сенсорным экраном для простого управления и выбора программ

Два работающих независимо друг от друга наконечника для сменных электродов (с цветовым кодированием): режущий-и режуще-/коагуляционный, цвет: желтый, коагуляционный, цвет: синий. Обеспечивают все способы лечения: разрезы, разрезы с коагуляцией для остановки кровотечения, коагуляция без эффекта резания, импульсная коагуляция для приваривания маленьких лоскутков ткани

- Автоматическая регулировка напряжения

Комплект поставки:

Аппарат с 2 автоклавируемыми ручками, ножной педалью, набором электродов (6 штук: №. 40, 2, 15, 13, 31, 33), нейтральный электрод

Дополнительно заказывайте hf-биполярный пинцет!

Частота + Мощность


Размер + Вес

- 2,2 МГц, макс. 50 Вт Ш 21,5 x В 11,7 x Г 25 см
- Питание от сети: 230 В / 50 Гц
- Моно- и биполярный
- Постоянный / импульсный


Описание изделия	Номер
hf1 Surg bipolar	452 459
hf биполярный пинцет, 110 мм, закругленный	452 447
hf биполярный пинцет 160 мм, закругленный	452 455

LaserHF® „комфорт“


Диодный лазер 975 Нм/6 Вт:
пародонтология, эндодонтия и другие

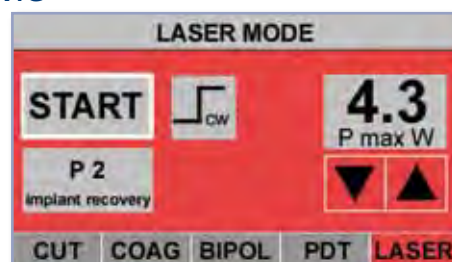

Терапевтический лазер: ЛИНИ, аФДТ

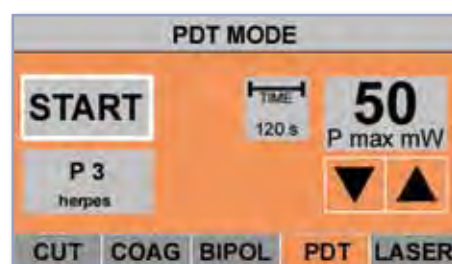

hf1 Surg® bipolar

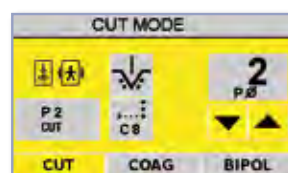

Источник: Проф. Др. мед. Франк Либауг

Speed Labolight®

**Универсальный аппарат для фотополимеризации**

- Для всех светоотверждаемых композитов и пластмассы
- Диапазон нанометра 320 – 550 Нм
- Оптимально сбалансированное смешение света для однородного и надежного отверждения
- Круговое расположение восьми стержневых ламп вокруг вращающегося основания (Ø 14 см) и одна галогенная лампа
- Регулировка от одной секунды до 99 минут, защита от перегрева, температура полимеризации в камере не превышает 40 °С
- Долговечные (ок. 1.000 часов), легко меняемые лампы
- Акустический сигнал при окончании процесса полимеризации
- Счетчик часов эксплуатации

Технические характеристики

Напряжение сети:	230 V, 50 Гц
Потребляемая мощность:	225 Вт
Предохранитель:	1 x 2,5 А
Лампы:	8 x 9 W T1 (Белый свет) 4 x 9 W T8 (UV-A) 1 x 150 W (галоген)
Размер (Ш x В x Г):	250 x 290 x 240 мм
Вес :	7 кг
Вращающееся основание:	Ø 14 cm

Описание изделия	Номер
Прибор с 13 лампами	401 125

Запасные лампы

Описание изделия	Номер
T1 (Белый свет) 9W / 71	901 002
T8 (UV-A) 9W / PLS-10	901 003
Галогеновая лампа	901 004
Набор (по 4 x T1 и T8, 1 x галогеновая лампа)	901 001


Bravo TD III



Трехфазный электродвигатель



Блок ножного управления

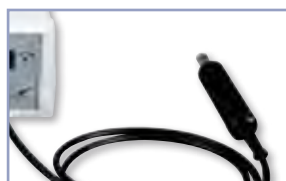

Наконечник

Бесколлекторный микроэлектродвигатель


- Универсальный аппарат для мелких лабораторных работ
- Для всех ходовых наконечников
- Бесступенчатая и точно выставляемая скорость вращения от 1.000 – 30.000 об/мин
- Левое-/правое вращение
- Прочный, не требующий особого ухода пластмассовый корпус
- Только для экстраоральной работы

Технические характеристики


Напряжение сети:	230 В
Мощность электродвигателя:	макс. 40 Вт
Размер (В x Ш x Г):	80 x 205 x 153 мм
Вес:	ок. 2,5 kg

Описание изделия	Номер
Bravo TD III	452 106

Профилактика периимплантита

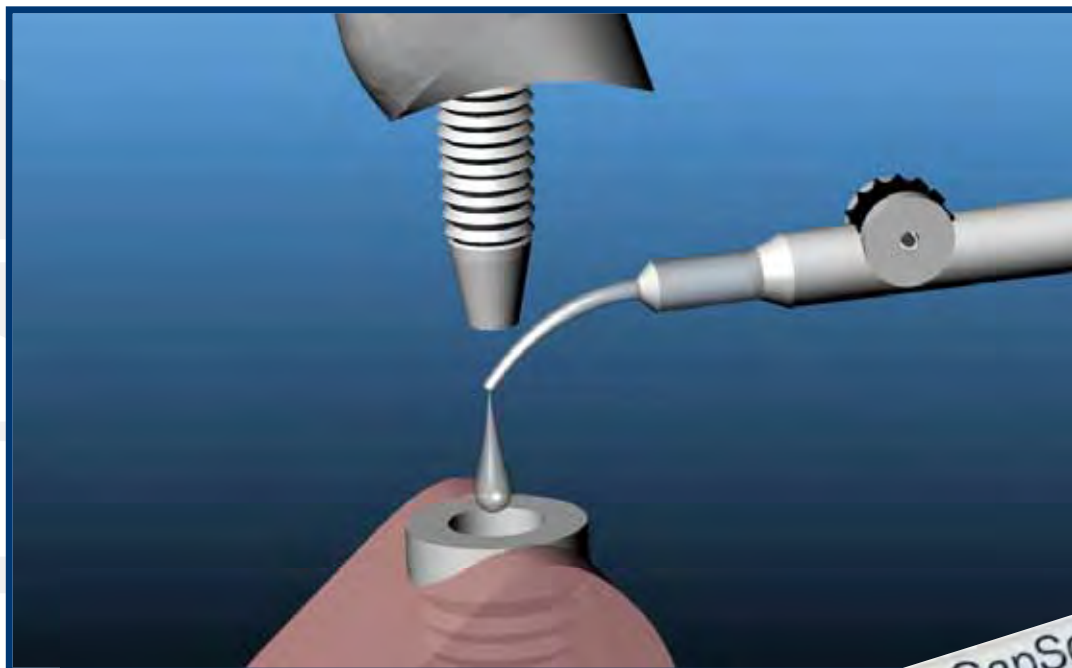

GapSeal®

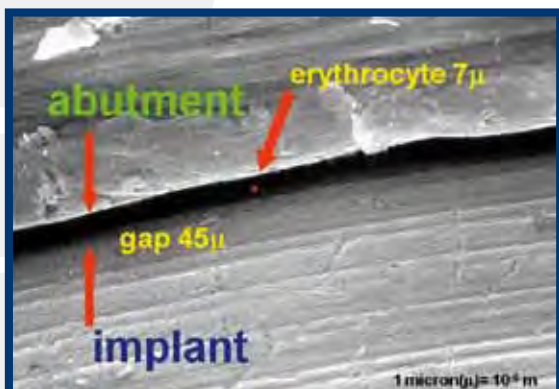

- Герметик для всех видов составных имплантатов
- Полностью устраняет подверженность реинфекции переимплантарных тканей
- Более 16 лет в клиническом использовании
- Очень прост в использовании

Подробная информация
на стр. 5

www.hagerwerken.de

Tel. +49 (203) 99269-0 · Fax +49 (203) 299283



Видео



**HÄGER
WERKEN**

Fit Kofferdam® Starterkit I



Fit Kofferdam® Starter Kit II

Fit Kofferdam® трафарет



Fit Kofferdam® подставка



Fit Kofferdam® щипцы



Стартовый набор № 1

- 1 подставка с 12 кламмерами (комплект)
- 1 Fit щипцы для кламмеров
- 1 Fit пробойник
- 1 Fit металлическая рамка, большая
- 1 Fit Кoffердам-методичка

Описание изделия	Номер
Fit-Kofferdam Starter Kit I	355 320

Стартовый набор № 2

- 1 подставка с 12 кламмерами (комплект)
- 1 Fit щипцы для кламмеров
- 1 Fit пробойник
- 1 Fit латексные платки, средние (36 листов)
- 1 Fit складная рамка (материал: пластик)
- 1 трафарет
- 1 Fit Кoffердам-методичка

Описание изделия	Номер
Fit-Kofferdam Starter Kit II	355 338

Для маркировки отверстий в коффердаме перед перфорацией

- Материал: прочная пластмасса

Описание изделия	Номер
Fit Кoffердам трафарет , 15 x 15 см	355 318

Подставка для кламмеров

Материал: нержавеющая сталь, с 8 кламмерами
по 2 x №. 9, по 1 x №. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204

Материал: нержавеющая сталь, с 12 кламмерами
по 1 x №. 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A

Материал: нержавеющая сталь, с 18 кламмерами
по 1 x №. P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 139, 210, 211

Описание изделия	Номер
Подставка с 8 кламмерами	355 330
Подставка с 12 кламмерами	355 331
Подставка с 18 кламмерами	355 332
Подставка без кламмеров (для 8 кламмеров)	355 327
Подставка без кламмеров (для 12 кламмеров)	355 328
Подставка без кламмеров (для 18 кламмеров)	355 329

Fit® пробойник – для идеально отштампованных, устойчивых к разрыву перфораций

- Передвижной дорновый пресс, который всегда захватывает весь край
- Из нержавеющей стали

Fit® щипцы для кламмеров – для бесппроблемного захвата кламмеров

- Легко блокируемые
- Исключается опрокидывание кламмеров

Описание изделия	Номер
Fit пробойник	355 321
Fit щипцы для кламмеров	355 333

Из натурального латекса

- Средний: очень легко продвигается в межзубные промежутки
- Плотный: для более плотной ретенции десны
- Высокая прочность на разрыв благодаря стабильному качеству
- При хранении в прохладном месте годен минимум год
- Цвет: зеленый (15 x 15 см), припудренный с одной стороны

Описание изделия	Толщина	Количество	Номер
Fit Latex, средний	0,18 – 0,23 мм	36 листов	355 335
Fit Latex, плотный	0,23 – 0,29 мм	36 листов	355 336

Чтобы натяжение латекса происходило лучше и быстрее в узких контактных пунктах, в роли смазочного материала мы рекомендуем наш Miradont-гель (Стр. 23).

Сепаратор для увеличения межзубного пространства

Описание изделия	Номер
Eliot Separator	355 325

Прочная рамка из нержавеющей стали

- Для натяжения коффердама без перфорации
- Автоклавированная

Описание изделия	Номер
Рамка I = большая	355 324
Рамка II = маленькая	355 323

Раскладная рамка из пластика

- Складывается посередине, облегчает доступ к рабочему полю
- Не рефлексит при проведении контрольных снимков, идеально подходит для эндодонтии
- Автоклавированная

Описание изделия	Номер
Fit складная рамка	355 319


Fit Kofferdam®-Latex



Fit Kofferdam® Eliot сепаратор



Fit Kofferdam® рамка

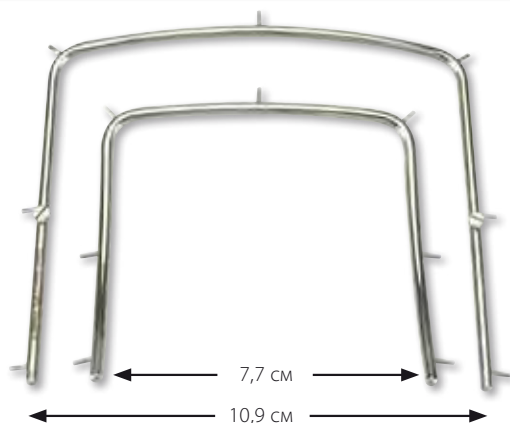

Fit® складная рамка



Bambach® стул-седло



Стандартный

Высокий

Стандартный+спинка

Цвета натуральной кожи



Черный

Желтая зебра

Солнце



Тан

Ацтек

Оранжевый



Маковый

Тернослив

Розовый



Инк

Атлантик голубой


Бегвуд



Герон

Серый

Кремовый

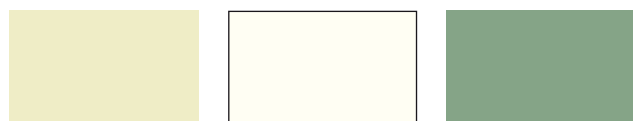

Айвори

Белый

Карибский



Нептун

Наш стул с сиденьем Bambach можно приобрести также и с обивкой из искусственной кожи (винил) различных цветов. Сделайте запрос на образцы цветов. Цвета похожи

Эрготерапевтический специальный стул

- Регулируются высота и угол наклона поверхности посадки
- Для устранения и предупреждения заболеваний спины, значительно уменьшает давление на межпозвоночный диск
- Натуральная позиция в области таза и позвоночника
- Благодаря регулировке наклона поверхности посадки: вертикальная позиция в области таза и прямая спина даже в рабочей позе при обслуживании пациента
- Поверхность из натуральной кожи (по желанию винил)

Высота стула идеально настроена на соответствующий рост человека:

Высота	Рост
S	до 1,60 м
M	до 1,90 м
L	от 1,90 м

(При заказе указывать рост)



Видео

Описание изделия	белый	черный
без спинки	460 004	460 007
со спинкой*	460 021	460 024

* спинка не может докупаться после, так как основание стула

со спинкой и без, принципиально разные



✗ Изменяет Вашу осанку

✓ Изменяет Вашу жизнь



Закажите нашу бесплатную брошюру о стуле Bambach с научной дополнительной информацией.

С удовольствием предоставим Вам Bambach для пробной посадки.

Специально для расслабления при долговременном лечении

- Идеально при долговременном лечении, как, напр., эндодонтия под микроскопом, операции и реставрации
- Расслабление плечевых мышц
- Подлокотник может быть установлен для максимального комфорта
- Двух видов:
Подлокотник короткий (длина 30 см)
Подлокотник длинный (длина 55 см)

Пожалуйста указывайте желаемый цвет - палитра с цветами
кожаных или виниловых лоскутков по запросу.

Описание изделия	Длина	Номер
Подлокотник, длинный	55 см	460 800
Подлокотник, короткий	30 см	460 801

Специальная регулировка высоты на подставке для ног

- Простая регулировка высоты сиденья без задействования рук
- Универсальное и быстрое изменение положения
- Идеально при операциях или длительном лечении
- Материал: нержавеющая сталь
- Только для стульев высотой L и M

Описание изделия	Номер
Регулировка высоты ножки, размер L	901 239
Регулировка высоты ножки, размер M	901 245

Специальный стул для операций

- Соответствует гигиеническим требованиям операционных
- Регулировка высоты сиденья без задействования рук
- Регулируемый угол наклона поверхности посадки
- Для предупреждения и устранения боли в спине
- Полностью дезинфицирующийся
- Поверхность посадки из полиэтилена (метод литья под давлением)
- Крепление места для сидения, ножка и подставка для ног из нержавеющей металла

Описание изделия	Цвет	Номер
Bambach OP	Черный	460 100

Интенсивный уход и защита для кожаных поверхностей

- Долгосрочно сохраняет кожаные поверхности мягкими
- Очень экономичный расход

После очистки и дезинфекции подходящим дезинфицирующим средством, тщательно смазывать 1-2 раза в неделю поверхность этим маслом.

Описание изделия	Номер
Масло для ухода за кожаными изделиями	50 мл 554 304
Масло для ухода за кожаными изделиями	10 штук 554 305
Mira Cleaning дезинфицирующие салфетки	115 штук 554 302

Bambach® стул-седло

Подлокотники



Педаль - регулятор высоты



Bambach® OP



Bambach® масло



H&W Classic



Стандарт защитных очков

- Мягкие дужки, регулируемые вытягиванием с последующей фиксацией
- Обеспечивает полную защиту со 180° беспрепятственного обзора
- Противотуманная и устойчивая к царапанию поверхность
- 100 % ударопрочные поликарбонатные линзы очков



28 г

Описание изделия	Стекло	Номер
H&W Classic	прозрачное	355 622

H&W OTG



Очки-на-очки

- Надеваются поверх корректирующих зрение очков
- Пропускает поток через систему вентиляции для уменьшения запотевания
- Поставляется с регулируемыми боковыми дужками
- Отличная защита во время работы в стоматологическом кабинете
- Противозапотевающая и устойчивая к царапанию поверхность



42 г

Описание изделия	Стекло	Номер
H&W OTG	прозрачное	355 623

Proto-Cam



Защитный щит

- Из светоотражающего поликарбоната
- Легкая дужка очков для закрепления на голове (25 г)
- Идеально при работе с эйр-флоу

Описание изделия	Номер
Белая дужка с 5 сменными щитками	355 535
Упаковка с 5 сменными щитками	355 536

Наушники для релаксации пациентов

- Расслабление и комфорт для пациента
- Технология управления звуком—управлению громкостью до 82 дБА
- Снижает шумы (степень снижения 25 дБ)
- Для подключения к MP-3 плееру, мобильному телефону или другой аудио-аппаратуре
- Включает в себя 10 гигиенических "Comfort Pads" (ушные подушечки)

Comfort Dream Intro Kit включает в себя: стерео-наушники, 3,5 мм запасной шнур и 10 "Comfort Pads" (ушные подушечки)

Описание изделия	Количество	Номер
Comfort Dreams Intro Kit	1 шт.	355 555
Comfort Dreams, подушечки	100 шт.	355 556
Comfort Dreams, запасной шнур	1 шт.	355 557

Comfort Dreams



Действенная помощь для расслабления

- Благодаря комканью и надавливанию зуба пациент приятным образом отвлекается
- Идеально подходит для снятия стресса или в виде подарка
- Размеры: 64 x 54 x 38,5 мм, вес: 42 г
- Материал: полиуретан

Описание изделия	Номер
Anti Stress зуб	707 002

Anti Stress ЗУБ



Двухстороннее зеркало для пациента

- Передняя часть 1:1, на обратной стороне двухкратное увеличение
- Ø 13 см
- Можно использовать как ручное, так и как настольное
- Идеально для контроля—прежде всего при профилактике и после отбеливания

Описание изделия	Номер
Mira-Duo	605 682

Mira-Duo®



Study Model Transparent De Luxe



Высококачественная прозрачная демонстрационная модель с различными клиническими случаями

- Демонстрация различных дефектов зубов в НЧ и ВЧ, протекание болезни кариесных дефектов, дополнительно с неправильным положением зубов мудрости в НЧ
- Разные примеры воспаленных корней
- Показ имплантатной работы в последовательности
- Модель произведена в масштабе 1:1
- Несъемные зубы




Описание изделия	Номер
Демонстрационная модель, прозрачная De Luxe	355 642

Study Model Child



Демонстрационная модель(ребенок)

- Очень понятное представление о молочных и постоянных зубах
- НЧ и ВЧ с десятью молочными зубами
- Масштаб: 1:1
- Несъемные зубы
- Заболевания зубов
- Межзубный и молярный кариес
- С поврежденным передним молочным зубом с воспалением корня

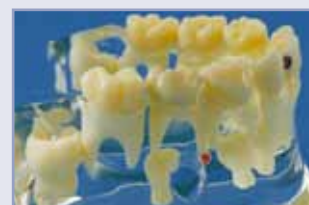

Описание изделия	Номер
Демонстрационная модель, прозрачная(ребенок)	355 643

Study Model Transparent



Высококачественная прозрачная демонстрационная модель

- Все 32 зуба могут быть вытащены из альвеолы
- Хорошо видимая, анатомическое течение заболевания корня
- Из прозрачного, прочного пластика
- Масштаб:1:1



Описание изделия	Номер
Демонстрационная модель, прозрачная	355 641

Увеличенная демонстрационная модель


- Для демонстрации правильной техники чистки зубов
- С большой зубной щеткой
- Идеально подходит для мотивации детей



Описание изделия	Номер
Модель с супер зубной щеткой	355 636
Супер зубная щетка отдельно	355 637

Демонстрационная модель для имплантолога

- Как наглядная помощь для объяснения ухода за имплантатом

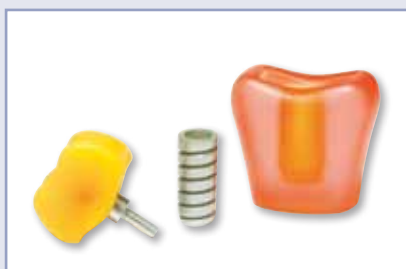

Описание изделия	Номер
Демонстрационная модель Demo Implant	355 644

Крем для тела

- Без минеральных масел и силиконов
- Без красителей
- Без ингредиентов животного происхождения
- Без синтетических отдушек

АЛОЭ ВЕРА для нормальной и чувствительной кожи

- Быстро впитывается в кожу

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО для нормальной и поврежденной кожи

- Очень приятная при заболеваниях кожи и нейродерматите
- Быстро впитывается в кожу

МАСЛО МАСЛЯННОГО ДЕРЕВА для стареющей и сухой кожи

- Очень эффективная и быстро впитывается в кожу

Экономичная упаковка – низкая цена

Описание изделия	Объем	Номер
Алоэ Вера, крем	500 мл	660 302
Оливковое масло, крем	500 мл	660 300
Масло маслянного дерева, крем	500 мл	660 301

Toothbrushing Model



Study Model Demo Implant



Ш x В x Г:
55 x 75 x 32 мм

Plantana®



Putzi-Pets



Ручные куклы с челюстями

- Идеальная мотивационная помощь для детей
- Для объяснения правильного ухода за зубами
- Проводят для детей разъяснительную работу о необходимых лечебных процедурах
- Особая фишка: с помощью маленькой бутылочки для воды куклы становятся водяными пистолетами
- Такие же хорошенькие, как и необходимые
- В четырех вариантах зверушек

Описание изделия	Номер
Putzi крокодил	707 045
Putzi динозавр	707 046
Putzi корова	707 047
Putzi конь	707 048

Miratoi® №1



Смешанный ассортимент

- Машинки, кораблики, расчески и т.д.



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №1, ассорти	150 шт.	605 690

Miratoi® №3



Набор "Ферма"

- Различные животные с фермы



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №3, ассорти	100 шт.	605 692

Miratoi® №4



Набор "Зоопарк"

- Различные животные из зоопарка

Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №4, ассорти	100 шт.	605 693

Подарки для маленьких пациентов.

Различные игрушки в ассортименте из нетоксичного пластика или металла.

Недооценимый вклад для хорошего маркетинга в стоматологическом кабинете!

Кольца

- Красивые кольца различных размеров



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №6, ассорти	100 шт.	605 694

Наручные часы

- Игра "Загони мяч в лунку" в форме ручных часов различных цветов



"Загони мяч
в лунку"

Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №7, ассорти	84 шт.	605 695

Шарики-попрыгунчики


- Забавные шарики-попрыгунчики различных цветов
- ø 2.5 см



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №8, ассорти	100 шт.	605 696

Мини-машинки и кораблики

- Мини-машинки и кораблики различных цветов

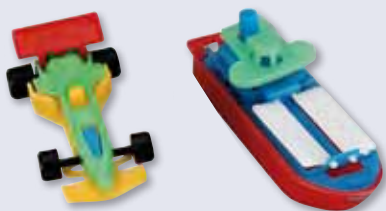

Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №10, ассорти	100 шт.	605 698

Miratoi® №6



Miratoi® №7



Miratoi® № 8



Miratoi® № 10



Miratoi® № 11 и № 12



Комплект медалей

- Знак особого отличия при мотивации для мужественных маленьких пациентов
- Рельефная медаль на ленточке
- Miratoi №11 из металла золотистого цвета без содержания никеля
- Miratoi №12 из пластика

По запросу грамоты на различных языках !

D - GB - F - E - IT - NL - HR - SRB - MK - P



Металл



Пластик

В упаковке 50 шт. и 50 дипломов

Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №11, материал: металл	50 шт.	605 703
Miratoi №12, материал: пластик	50 шт.	605 706

Miratoi® No. 13



Сундучки

- Идеально подходит для хранения молочных зубов



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi No. 13, ассорти	100 шт.	605 699

Miratoi® № 15



Мини пони

- С расческой для расчесывания
- В пяти различных цветах

Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi No. 15	50 шт.	605 701

Miratoi® № 17



Пальчиковые скейтборды

- Бесподобные пальчиковые скейтборды в пяти клевых дизайнах



Описание изделия	Количество	Номер
Miratoi №17	50 шт.	605 707

Герметичный футляр для хранения протезов

- Предназначена для хранения и очистки протезов
- Водонепроницаема благодаря специальной защелке
- Для двух протезов и 80 мл жидкости
- Предназначена также и для съемных брекетов
- Коробка содержит двухстороннюю щетку для очистки: белые ворсинки для опорной поверхности, черные ворсинки для углублений в протезе
- Ячейка для щетки также предназначена и для чистящих таблеток
- С зеркалом в крышке

Описание изделия	Номер
Коробка со щеткой	605 900
Щетка(отдельно)	605 901

Настольное зеркало в форме зуба

- Размеры: ок. 17 x 14 см

Описание изделия	Номер
McTooth зеркало	707 094

Ксилит – 100 % натуральный и полезный заменитель сахара

- Для слащения холодных и горячих напитков, фруктов, мюсли или выпечки
- Такая же степень сладости, как и у сахара
- Чисто натуральный продукт, без глютена и без использования ГМО
- На 40 % меньше калорий чем у сахарозы



полезен для зубов

Описание изделия	Вес	Номер
Ксилит, песок	350 г	630 119
Ксилит, песок	100 x 4 г	630 120
Ксилит, песок	5 x 350 г	635 080

Protho Box®



McTooth® Зеркало



Xylitol песок



Успешная профилактика периимплантита

Автор: профессор, доктор медицинских наук, доктор К. У. Фритцмайер, Дюссельдорф / Германия



**Профессор, доктор
медицинских наук, доктор**

Клаус Удо Фритцмайер

- родился в 1940 г. в Гамбурге
- изучал медицину и стоматологию в Берлине, Цюрихе, Гамбурге
- получил лицензию на оказание стоматологических услуг в 1968
- докторская степень по стоматологии и медицине 1972/74
- получил лицензию на оказание медицинских услуг в 1974
- получил квалификацию специалиста в области стоматологической и челюстно-лицевой хирургии в 1978
- в 1984 получил квалификацию профессора в области стоматологической и челюстно-лицевой хирургии в университете Дюссельдорфа, Германия
- с 2006 является почетным профессором
- с 2010 является лектором и консультантом

Вступление

В последние десятилетия имплантология стала рассматриваться как одно из самых инновационных направлений в стоматологии. В будущем ожидается значительное усиление ее роли. По сравнению с традиционными методами протезирования эндоосяльная имплантология представляет собой простое лечение, которое обычно не вызывает особого стресса у пациентов и имеет много преимуществ.

Так, например, физиологическая имплантация жевательных конструкций в костную ткань, при определенных условиях, может даже вызвать возобновление роста костной ткани.

Разработанный метод будет рассмотрен с учетом вышесказанного, а также всего разнообразия практик протезирования.

Одним из самых распространенных и ожидаемых осложнений в имплантологии является периимплантит (Рис. 1), который, если его не лечить, обычно приводит к потере имплантата.

Введение

На начальном этапе периимплантное заболевание ткани проявляется в форме мукозита с прогрессирующей потерей костной ткани в области имплантата (см. Альбретссон и др.). Определить причины данной картины болезни довольно сложно. Касательно развития периимплантита выдвигались различные гипотезы, например, недостаточная гигиена полости рта, недостаточная прочность десны и/или чрезмерная нагрузка на имплантаты. Эти гипотетические факторы, вызывающие заболевание, противоречат утверждениям известных имплантологов. «Отсутствие или недостаточная ширина кератинизированной десны не имеет причинно-обусловленной связи с развитием гингивита и периимплантита» или «Функциональная нагрузка на имплантат не может рассматриваться как единственная причина прогрессирующей потери костной ткани». Это значит, что наряду с указанными очевидными причинами возникновения и развития заболевания должны быть еще какие-то патологические факторы, вызывающие болезнь и способствующие ее развитию.

В качестве терапии предлагают как мероприятия по улучшению гигиены полости рта, так и закладывание антибиотиков и дезинфицирующих средств в периимплантные карманы,



Рис. 1: Периимплантит: клиническая картина и на рентгеновском снимке

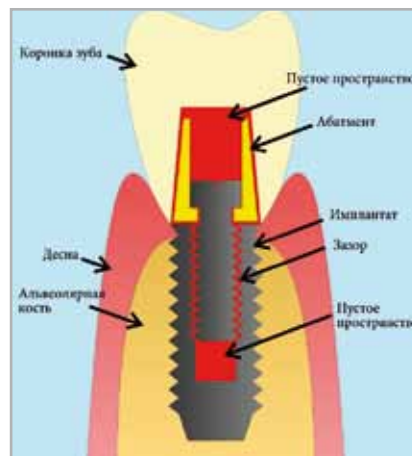


Рис. 2: Эндоосяльный имплантат, зазоры и полости отмечены красным цветом

а также ультразвуковое лечение и лазерное выскабливание воспаленных тканей. Основное внимание, однако, следует уделять не столько лечению, сколько эффективной профилактики развития периимплантита.



To get the whole interview please scan the QR-code.

Interview

Клиника: _____

Контактное лицо: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____ Интернет: www. _____

Адрес: _____ Страна: _____

Дилер стоматологического оборудования: _____

В (важно для поставки): _____

К-во.	Номер	Артикул

К-во.	Номер	Артикул

Пожалуйста, пришлите мне информацию о следующих продуктах: _____



**Ваш партнер
в области
стоматологии, идей и
сервиса.**



2014052202-RUS

www.dentald.ru